



CATÁLOGO **ORDINARIO**

2024



ÍNDICE

ACERCA DE NOSOTROS

- 1** Mensaje a nuestros clientes
- 2** Empresas e instituciones que han confiado en nosotros
- 3** Nuestra misión y visión
- 4** Valores

CATÁLOGO DE ESTUDIOS

- 6** Nuestro catálogo de estudios

PANELES Y PERFILES

- 93** Nuestro catálogo de paneles y perfiles

LISTA DE ALERGENOS

- 121** Nuestro catálogo de alergenos

LISTA DE CUESTIONARIOS

- 129** Nuestra lista de cuestionarios

ENVÍO DE MUESTRAS

- 133** Guía de embalaje de muestras

AVISO DE PRIVACIDAD

- 137** Aviso de privacidad

ESTIMADO CLIENTE:

Estimado Cliente:

Nos llena de orgullo compartir con usted la evolución de nuestro laboratorio, plasmada en un catálogo renovado que ahora se enriquece con los servicios de pruebas diagnósticas y análisis clínicos.

Nuestra empresa, cimentada sobre la adaptabilidad y el crecimiento, celebra especialmente su progreso en estudios de alta especialidad y biología molecular, disciplinas donde la innovación tecnológica es el motor de nuestro servicio.

Remontándonos a nuestro origen en 2014 como MDT Laboratorio Clínico, nos destacamos por estar siempre a la vanguardia de la innovación y la precisión diagnóstica. El diálogo constante con el mercado y nuestra clientela ha impulsado una transformación significativa, dando paso al nacimiento de Labnestic.

Este nuevo capítulo en nuestra historia se inscribe en la necesidad de superar los estándares previos, con un firme compromiso hacia la precisión absoluta y la adopción de tecnología de punta.

La llegada del SARS-CoV-2 fue un momento de prueba, durante el cual no solo sostuvimos nuestro compromiso, sino que elevamos nuestros estándares de excelencia y servicio, una promesa que continúa brillando en nuestro amplio espectro de especialidades diagnósticas, en áreas cruciales como Biología Molecular, Química Clínica, Inmunología, Inmunología Molecular, Parasitología, Hematología y Coagulación.

Nuestros centros de procesamiento, ubicados estratégicamente en Ciudad de México, Aguascalientes y Estado de México, extienden su alcance a lo largo y ancho de los 32 estados, asegurando una logística eficaz y una infraestructura robusta que permite la entrega de resultados confiables y rápidos.

Nuestro impulso para avanzar y superar las expectativas de nuestros clientes y colaboradores es inquebrantable. Estamos comprometidos a contribuir al cuidado de la salud de nuestra comunidad mediante nuestra experiencia y vanguardia tecnológica, anticipando y superando las necesidades de un mercado dinámico.


Agradecemos profundamente la confianza que ha depositado en nosotros y reafirmamos nuestro compromiso de entregar un servicio diagnóstico no solo extenso sino también especializado. Su elección de Labnestic como aliado en el cuidado de la salud impulsa nuestra continua búsqueda de innovación y excelencia.

Atentamente,



Pedro Herrera
Director General

ALGUNAS EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS

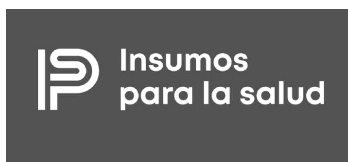

MISIÓN Y VISIÓN


MISIÓN

Ofrecer una amplia gama de productos y servicios; mediante el desarrollo, promoción e innovación de soluciones eficientes que contribuyan a la prevención, diagnóstico oportuno y al adecuado tratamiento de las enfermedades de nuestros pacientes y clientes.

VISIÓN

Mantenemos una visión sustentada en el trabajo constante y la innovación continua, buscando: Ser una empresa líder en el campo de la salud preventiva y de diagnóstico reconocida por su confiabilidad, calidad y profesionalismo que contribuya a una mejor calidad de vida para la población mexicana.

VALORES

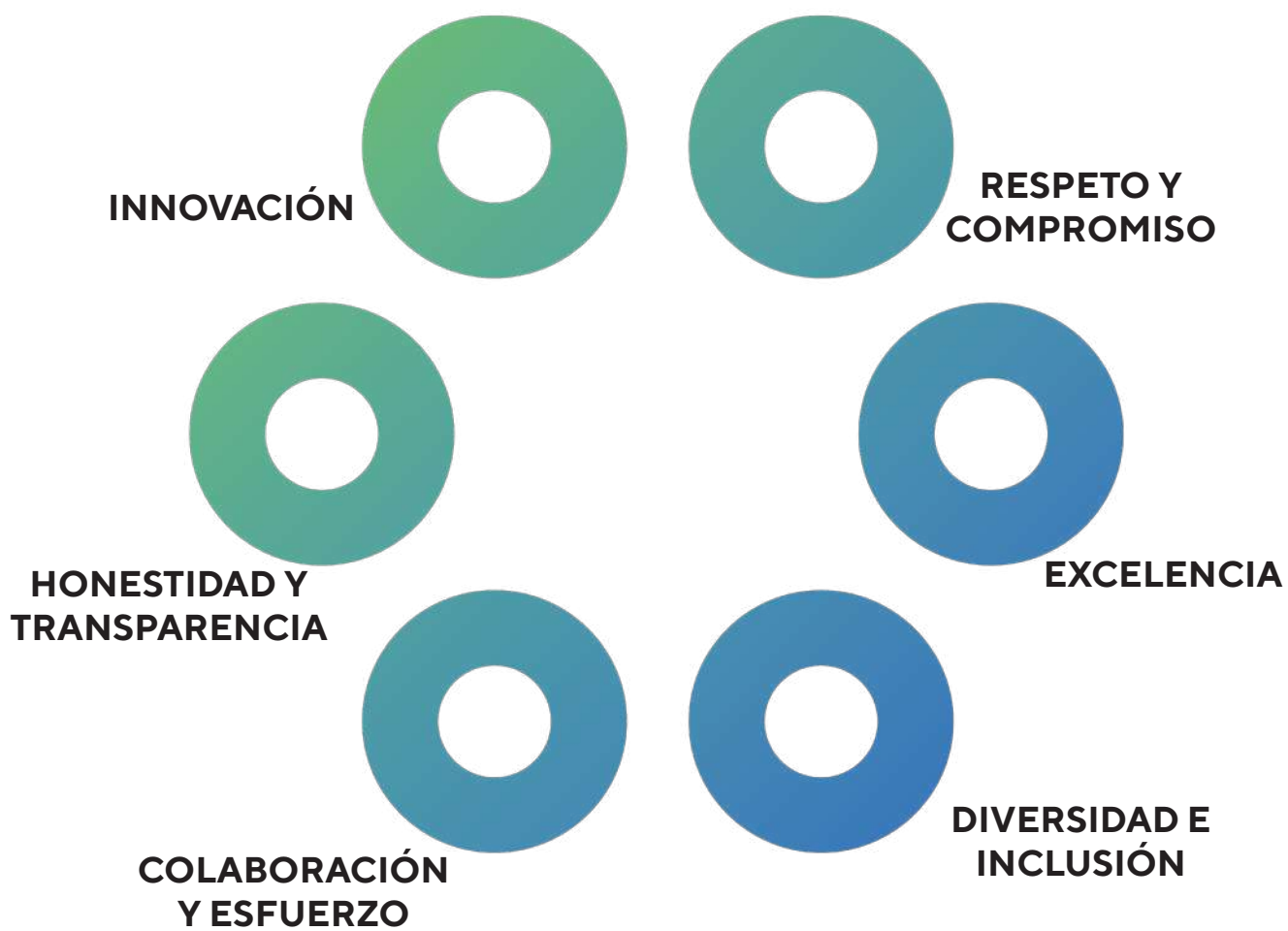



CATÁLOGO DE
ESTUDIOS

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-002	17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-001	17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA NEONATAL	SANGRE EN PAPEL FILTRO	TARJETA GUTHRIE. ENVIAR 2 CIRCULOS DE SANGRE TOTAL. TEMPERATURA AMBIENTE VER ANEXO X (Toma de muestra para tamiz neonatal).	4 DIAS
LB-003	17-CETOESTEROIDES EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-004	17-CETOESTEROIDES EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-006	17-HIDROXICORTICOESTEROIDES EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-007	17-HIDROXICORTICOESTEROIDES EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-005	17-HIDROXI-ESTEROIDES	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-005	17-HIDROXI-ESTEROIDES	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS


CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-008	2-MERCAPTOETANOL (AC ANTI BRUCELLA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-965	5-NUCLEOTIDASA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-009	ABSORCION DE D-XILOSA URINARIA DE 5 H	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	11 DIAS
LB-109	AC ANTI ACIDO GLUTAMICO DESCARBOXILASA (GAD 65)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS
LB-011	AC ANTI ANTIGENO E DE HEPATITIS B (αHBe)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-100	AC ANTI ANTIGENO HEPATICO SOLUBLE (SLA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	13 DIAS
LB-012	AC ANTI ANTIGENO S DE HEPATITIS B (αHBs)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-101	AC ANTI ASPERGILLUS FUMIGATUS IgA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	9 DIAS
LB-173	AC ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA 1 IgA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-172	AC ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA 1 IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-174	AC ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA 1 IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-984	AC ANTI BLOQUEADORES RECEPTORES ACETILCOLINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-985	AC ANTI BORRELLIA BURGDORFERI EN LCR	LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	JERINGA ASEGURANDO EL EMBOLO. ENVIAR 2 ML DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-013	AC ANTI BORRELLIA BURGDORFERI IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-539	AC ANTI BORRELLIA BURGDORFERI IgG e IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-014	AC ANTI BORRELLIA BURGDORFERI IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-015	AC ANTI CARDIOLIPINAS IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-540	AC ANTI CARDIOLIPINAS IgG e IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS




CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-016	AC ANTI CARDIOLIPINAS IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-017	AC ANTI CELULAS PARIETALES	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-018	AC ANTI CENTROMERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-987	AC ANTI CHIKUNGUNYA IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-988	AC ANTI CHIKUNGUNYA IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-019	AC ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-020	AC ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-021	AC ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-022	AC ANTI CISTICERCO EN LCR	LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	JERINGA ASEGURANDO EL EMBOLO. ENVIAR 2 ML DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-023	AC ANTI CISTICERCO EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-024	AC ANTI CITOMEGALOVIRUS IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-025	AC ANTI CITOMEGALOVIRUS IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-989	AC ANTI CITOPLASMA DE NEUTROFILO (C Y P) IFI	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-026	AC ANTI CITOPLASMA DEL NEUTROFILO CITOPLASMATICOS (ANCA-C)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-027	AC ANTI CITOPLASMA DEL NEUTROFILO PERINUCLEARES (ANCA-P)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-028	AC ANTI COCCIDIOIDES IMMITIS IgG e IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	9 DIAS
LB-029	AC ANTI CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-030	AC ANTI DENGUE IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

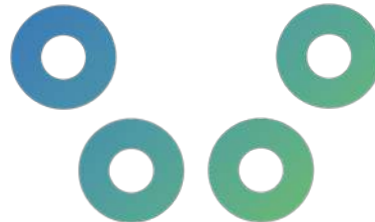**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES
DE LA MUESTRA****PLAZO DE
ENTREGA**

LB-103	AC ANTI DENGUE IgG e IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-031	AC ANTI DENGUE IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-032	AC ANTI DNA CADENA SENCILLA (DESNATURALIZA-	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-033	AC ANTI DNA DOBLE CADENA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-034	AC ANTI DNA NATIVO (IFI)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-991	AC ANTI DONADOR ESPECIFICO (DSA)	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-992	AC ANTI ECHO VIRUS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	7 DIAS
LB-993	AC ANTI ENDOMISIO IgA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS
LB-994	AC ANTI ENDOMISIO IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	18 DIAS

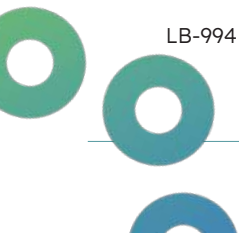

CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES
DE LA MUESTRA****PLAZO DE
ENTREGA**

LB-035	AC ANTI ENTAMOEBA HISTOLYTICA (SERAMEBA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-037	AC ANTI EPSTEIN BARR AG NUCLEAR IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-996	AC ANTI EPSTEIN BARR AG NUCLEAR IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-995	AC ANTI EPSTEIN BARR AG TEMPRANO IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-038	AC ANTI EPSTEIN BARR CAPSIDE IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-039	AC ANTI EPSTEIN BARR CAPSIDE IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-036	AC ANTI EPSTEIN BARR IgG AG TEMPRANO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-040	AC ANTI ESPERMATOZOIDES (DIRECTOS)	SUERO Y LIQUIDO SEMINAL	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION Y CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR MINIMO 2 ML DE SEMEN. TEMPERATURA AMBIENTE.	2 DIAS


CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-041	AC ANTI FOSFOLIPIDOS IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-042	AC ANTI FOSFOLIPIDOS IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-999	AC ANTI GLIADINA IgA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-1000	AC ANTI GLIADINA IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-998	AC ANTI GLIADINA IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-043	AC ANTI HELICOBACTER PYLORI IgA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-044	AC ANTI HELICOBACTER PYLORI IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-045	AC ANTI HELICOBACTER PYLORI IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-541	AC ANTI HEPATITIS A (HAV-G/HAV-M)	LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	JERINGA ASEGURANDO EL EMBOLO. ENVIAR 2 ML DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-047	AC ANTI HEPATITIS A IgG (HAV-G)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-046	AC ANTI HEPATITIS A IgM (HAV-M)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-048	AC ANTI HEPATITIS C (AHCV)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-049	AC ANTI HEPATITIS D (HDV)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-050	AC ANTI HEPATITIS E IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-051	AC ANTI HEPATITIS E IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-052	AC ANTI HERPES I IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-053	AC ANTI HERPES I IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-054	AC ANTI HERPES II IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS



CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-055	AC ANTI HERPES II IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-056	AC ANTI HISTONAS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-057	AC ANTI HISTOPLASMA CAPSULATUM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-061	AC ANTI HLA PRA (TRASPLANTE)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-059	AC ANTI INSULINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1001	AC ANTI ISLOTES DE LANGERHANS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	7 DIAS
LB-060	AC ANTI JO-1 (POLIOMIELITIS)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1002	AC ANTI LEPTOSPIRA IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-062	AC ANTI LKM/1 IgG (MICROSOMALES HIGADO Y RIÑON)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE	3 DIAS

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-063	AC ANTI MEMBRANA BASAL GLOMERULAR	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-065	AC ANTI MITOCONDRIALES	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-1003	AC ANTI MODULADORES ACETILCOLINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-066	AC ANTI MUSCULO LISO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-067	AC ANTI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1004	AC ANTI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-068	AC ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-069	AC ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1005	AC ANTI NEUMOCOCO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	5 DIAS

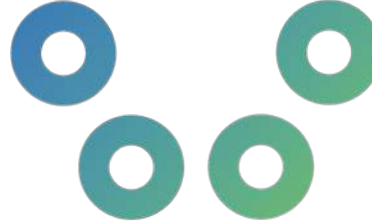

CÓDIGO

ESTUDIO

TIPO DE MUESTRA

CONDICIONES DE LA MUESTRA

PLAZO DE ENTREGA

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-070	AC ANTI NUCLEARES (ANA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-071	AC ANTI NUCLEARES IFI (ANA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-1006	AC ANTI NUCLEOSOMA (N-H-AB)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-072	AC ANTI PAROTIDITIS IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-073	AC ANTI PAROTIDITIS IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-074	AC ANTI PARVOVIRUS B19 IgG e IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-075	AC ANTI PEPTIDO CICLICO CITRULINADO (CCP)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-064	AC ANTI PEROXIDASA TIROIDEA (A-TPO)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-076	AC ANTI PLAQUETARIOS	SUERO Y SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO Y TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS




CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-1007	AC ANTI RECEPTOR DE TSH	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS
LB-010	AC ANTI RECEPTORES DE ACETILCOLINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-077	AC ANTI RETICULINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-078	AC ANTI RIBONUCLEOPROTEINA (RNP)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-079	AC ANTI RICKETTSIA IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-080	AC ANTI RICKETTSIA IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-081	AC ANTI RNA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1008	AC ANTI ROTAVIRUS IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1009	AC ANTI ROTAVIRUS IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-082	AC ANTI RUBEOLA IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-083	AC ANTI RUBEOLA IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1010	AC ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE IgG e IgA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	9 DIAS
LB-084	AC ANTI SALMONELLA SP.	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-085	AC ANTI SARAMPION IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-086	AC ANTI SARAMPION IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-087	AC ANTI SCL-70 (ESCLERODERMIA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1011	AC ANTI SINCICIAL RESPIRATORIO IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-1012	AC ANTI SINCICIAL RESPIRATORIO IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE	8 DIAS

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-088	AC ANTI SMITH (SM)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-089	AC ANTI SSA (RO)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-090	AC ANTI SSB (LA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-091	AC ANTI TIROGLOBULINA (A-TG)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-092	AC ANTI TOXOCARA CANIS IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-093	AC ANTI TOXOPLASMA GONDII IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-094	AC ANTI TOXOPLASMA GONDII IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-096	AC ANTI TRANSGLUTAMINASA IgA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS
LB-095	AC ANTI TRANSGLUTAMINASA IgG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS

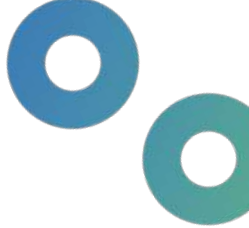

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-1013	AC ANTI TREPONEMA PALLIDUM (FTA-ABS)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-1014	AC ANTI TREPONEMA PALLIDUM (SIFILIS)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1015	AC ANTI TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-098	AC ANTI VARICELA IgG HERPES ZOSTER	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-099	AC ANTI VARICELA IgM HERPES ZOSTER	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-058	AC ANTI VIH 1 Y 2	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-940	AC DE CENTRO DE HEPATITIS B CORE (αHBc)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-941	AC DE CENTRO DE HEPATITIS B CORE IgM (αHBcM)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-104	ACETAMINOFEN (TYLENOL)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS



CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-105	ACETONA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	5 DIAS
LB-106	ACIDO 5-HIDROXI-INDOLACETICO EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-107	ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-108	ACIDO FOLICO (FOLATOS)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-110	ACIDO HIPURICO (TOLUENO)	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	15 DIAS
LB-111	ACIDO LACTICO (LACTATO)	PLASMA CON HEPARINA	TUBO TAPON VERDE. ENVIAR 3 ML DE PLASMA CON HEPARINA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1122	ACIDO MANDELICO + ACIDO FENILGLIOXILICO	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	13 DIAS
LB-113	ACIDO URICO EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS





CÓDIGO

ESTUDIO

TIPO DE MUESTRA

CONDICIONES DE LA MUESTRA

PLAZO DE ENTREGA

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-112	ACIDO URICO EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-114	ACIDO VALPROICO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-115	ACIDO VANILMANDELICO EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-116	ACIDOS GRASOS LIBRES	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1016	ACTIVIDAD TRIPTICA EN HECES	HECES	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 10 G DE HECES FECALES RECIENTES DEL TAMAÑO DE UNA NUEZ. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1017	ADENOSIN DESAMINASA (ADA)	SUERO, LCR, LIQUIDO PLEURAL O PERITONEAL	TTUBO TAPON DORADO. ENVIAR 5 ML DE SUERO O JERINGA ASEGURANDO EMBOLO. ENVIAR LIQUIDO CEGALORRAQUIDEO, PLEURAL O PERITONEAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-117	ADRENALINA EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-118	ADRENALINA EN PLASMA	PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS

CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-119	AG CARCINOEMBRIÓNICO (CEA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-120	AG CHLAMYDIA TRACHOMATIS	CEPILLADO URETRAL/ VAGINAL	TUBO DE PLASTICO SECO SIN ADITIVOS, ESTERIL, BIEN SELLADO. ENVIAR CEPILLADO O HISOPADO URETRAL O VAGINAL. TEMPERATURA AMBIENTE. O VAGINAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	2 DIAS
LB-121	AG DE HISTOCOMPATIBILIDAD HLA-B27	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-125	AG DE VIH P24	SUERO	TUBO TAPON ROJO. ENVIAR 3 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-122	AG E DE HEPATITIS B (HBeAg)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1018	AG GIARDIA LAMBLIA	HECES	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 10 G DE HECES FECALES RECIENTES DEL TAMAÑO DE UNA NUEZ. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-123	AG HELICOBACTER PYLORI EN HECES	HECES	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 10 G DE HECES FECALES RECIENTES DEL TAMAÑO DE UNA NUEZ. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1019	AG HISTOCOMPATIBILIDAD HLA CLASE I POR PCR- SSP	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-394	AG HISTOCOMPATIBILIDAD HLA CLASE I Y II POR PCR-SSP	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	13 DIAS

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-395	AG HISTOCOMPATIBILIDAD	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-1020	AG NS1 DE DENGUE	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-124	AG S DE HEPATITIS B (HBsAg)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-126	AGREGACION PLAQUETARIA	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 20 ML DE SANGRE TOTAL CON CITRATO, NO ABRIR LOS TUBOS Y NO CENTRIFUGAR. ANOTAR HORA DE LA FLEBOTOMIA. TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 4 HORAS).	3 DIAS
LB-127	ALANINA AMINOTRANSFERA-	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-128	ALBUMINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-129	ALBUMINA EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-130	ALBUMINA EN ORINA OCASIONAL	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-131	ALCOHOL	SUERO U ORINA	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO O CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-132	ALDOLASA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-133	ALDOSTERONA EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-134	ALDOSTERONA EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-135	ALFA 1 ANTITRIPSINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-427	ALFA 2 MACROGLOBULINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-136	ALFAFETOPROTEINA (AFP)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-137	ALUMINIO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS




CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-138	AMIKACINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-140	AMILASA EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-139	AMILASA EN SUERO	ORINA	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-141	AMINOACIDOS EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	9 DIAS
LB-142	AMINOACIDOS EN SANGRE (9)	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	9 DIAS
LB-143	AMINOFILINA (TEOFILINA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-144	AMONIO	PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-145	ANALISIS BACTERIOLOGICO DE AGUA POTABLE	AGUA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 100 ML DE AGUA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-1021	ANALISIS DE AGUA PARA DETECCION DE VIBRIO CHOLERAE	AGUA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 100 ML DE AGUA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-1022	ANALISIS FISICO- QUIMICO DE AGUA NOM 127	AGUA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 1000 ML DE AGUA. TEMPERATURA AMBIENTE.	14 DIAS
LB-1023	ANALISIS FISICO- QUIMICO DE AGUA RESIDUAL NOM 003	AGUA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 1000 ML DE AGUA. TEMPERATURA AMBIENTE.	14 DIAS
LB-146	ANALISIS FISICO-QUIMICO DE AGUA POTABLE	AGUA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 1000 ML DE AGUA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-147	ANDROGENOS TOTALES	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-148	ANDROSTENEDIONA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-149	ANFETAMINAS	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-150	ANGIOTENSINA	PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-151	ANTI ESTREPTOLISINA O (ASO)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-942	ANTICOAGULANTE LUPICO	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-1024	ANTICOAGULANTE LUPICO CONFIRMATORIO	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1165	ANTIGENO LEUCOCITARIO HUMANO B27	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-1166	ANTIGENO LEUCOCITARIO HUMANO B57	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-1162	ANTIGENO LEUCOCITARIO HUMANO CLASE I (A, B, C)	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA AMBIENTE.	6 DIAS
LB-1164	ANTIGENO LEUCOCITARIO HUMANO CLASE I (A, B, C) Y CLASE II (DR, DQ, DP)	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA AMBIENTE.	6 DIAS
LB-1163	ANTIGENO LEUCOCITARIO HUMANO CLASE II (DR, DQ, DP)	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA AMBIENTE.	6 DIAS
LB-154	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-155	ANTIGENO PROSTATICO FRACCION LIBRE (PSA LIBRE)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-967	ANTIGENO SARS COV-2	HISOPADO	TUBO DE PLASTICO SECO SIN ADITIVOS, ESTERIL, BIEN SELLADO. ENVIAR HISOPADO. TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 8 H).	1 DIAS

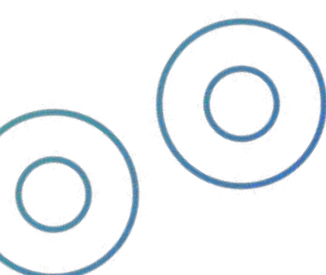**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-156	ANTITROMBINA III	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-157	APOLIPOPROTEINAS A1	AGUA	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-158	APOLIPOPROTEINAS B	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-160	ARSENICO EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	10 DIAS
LB-159	ARSENICO EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-161	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST/TGO)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION. REFRIGERACION.	1 DIAS
LB-162	AZUCARES REDUCTORES EN HECES	HECES	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 10 G DE HECES FECALES RECIENTES DEL TAMAÑO DE UNA NUEZ. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-164	BACILOSCOPIA 1 MUESTRA	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA O BOLSA DE PLASTICO CON CIERRE HERMETICO. ENVIAR EXPECTORACION, ASPIRACION BRONQUIAL O FLEMA. TEMPERATURA AMBIENTE.	2 DIAS



CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-165	BACILOSCOPIA EN SERIE DE 2 MUESTRAS	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLÁSTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA O BOLSA DE PLÁSTICO CON CIERRE HERMÉTICO. ENVIAR EXPECTORACION, ASPIRACION BRONQUIAL O FLEMA. TEMPERATURA AMBIENTE.	2 DIAS
LB-166	BACILOSCOPIA EN SERIE DE 3 MUESTRAS	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLÁSTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA O BOLSA DE PLÁSTICO CON CIERRE HERMÉTICO. ENVIAR EXPECTORACION, ASPIRACION BRONQUIAL O FLEMA. TEMPERATURA AMBIENTE.	2 DIAS
LB-167	BACILOSCOPIA EN SERIE DE 4 MUESTRAS	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLÁSTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA O BOLSA DE PLÁSTICO CON CIERRE HERMÉTICO. ENVIAR EXPECTORACION, ASPIRACION BRONQUIAL O FLEMA. TEMPERATURA AMBIENTE.	2 DIAS
LB-168	BACILOSCOPIA EN SERIE DE 5 MUESTRAS	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLÁSTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA O BOLSA DE PLÁSTICO CON CIERRE HERMÉTICO. ENVIAR EXPECTORACION, ASPIRACION BRONQUIAL O FLEMA. TEMPERATURA AMBIENTE.	2 DIAS
LB-169	BACILOSCOPIA EN SERIE DE 6 MUESTRAS	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLÁSTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA O BOLSA DE PLÁSTICO CON CIERRE HERMÉTICO. ENVIAR EXPECTORACION, ASPIRACION BRONQUIAL O FLEMA. TEMPERATURA AMBIENTE.	2 DIAS
LB-170	BARBITURICOS EN ORINA	ORINA	CONTENEDOR DE PLÁSTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-171	BENZODIACEPINAS EN ORINA	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-175	BETA 2 MICROGLOBULINA EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-176	BETA 2 MICROGLOBULINA EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-163	B-HGC LIBRE (RIA) (FRACCION BETA LIBRE DE HGC POR RIA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-177	BICARBONATO (HCO ₃)	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-178	BILIRRUBINA CONJUGADA (DIRECTA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION. REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-179	BILIRRUBINA NO CONJUGADA (INDIRECTA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-180	BILIRRUBINA TOTAL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS




CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-542	BILIRRUBINAS (BT,BC,BNC)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-181	BIOMETRIA HEMATICA	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	1 DIAS
LB-182	BIOPSIA DE APENDICE	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-183	BIOPSIA DE CERVIX	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-184	BIOPSIA DE COLON	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-185	BIOPSIA DE CONO CERVICAL	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-186	BIOPSIA DE ENDOMETRIO	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-187	BIOPSIA DE ESOFAGO	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-188	BIOPSIA DE HUSO DE PIEL	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE. REFRIGERACION.	8 DIAS




CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-189	BIOPSIA DE LIPOMA	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-190	BIOPSIA DE MAMA	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-191	BIOPSIA DE NEVO	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-192	BIOPSIA DE POLIPO	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-193	BIOPSIA DE PROSTATA	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-194	BIOPSIA DE RESTOS OVULO-PLACENTARIOS	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-195	BIOPSIA DE SITIO ESPECIFICO (DE 0.0 A 3.0 CM)	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-196	BIOPSIA DE SITIO ESPECIFICO (DE 3.1 A 7.0 CM)	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-197	BIOPSIA DE SITIO ESPECIFICO (DE 7.1 A 12.0 CM)	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS

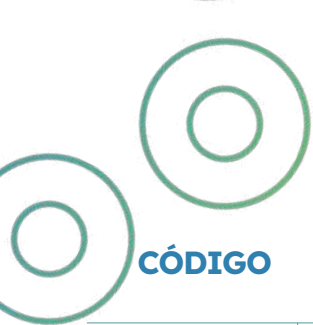

**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES
DE LA MUESTRA****PLAZO DE
ENTREGA**

LB-198	BIOPSIA DE SITIO ESPECIFICO (MAYOR A 12.0 CM)	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-199	BIOPSIA DE TESTICULO	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-200	BIOPSIA DE UTERO CON	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-201	BIOPSIA DE UTERO SIN ANE-	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-202	BIOPSIA DE VERRUGA	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-203	BIOPSIA DE VESICULA	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-204	BIOPSIA GASTRICA	TEJIDO EN FORMOL AL 10%	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-1026	BIOPSIA POR ASPIRACION CON AGUJA FINA BAAF	LIQUIDO O MATERIAL BIOLOGICO	JERINGA ASEGURANDO EL EMBOLO O LAMINILLA FIJADA CON ALCOHOL AL 96° ROTULADA. ENVIAR LIQUIDO O MATERIAL BIOLOGICO. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-205	BIOTINIDASA	SANGRE EN PAPEL FILTRO	TARJETA GUTHRIE. ENVIAR 2 CIRCULOS DE SANGRE TOTAL. TEMPERATURA AMBIENTE VER ANEXO X (Toma de muestra para tamiz neonatal).	4 DIAS

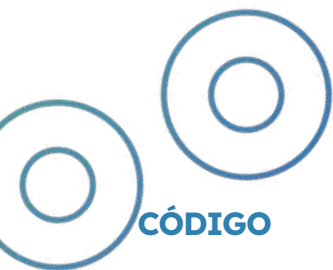

**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-206	BLASTOS BUSQUEDA DE	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL EN EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-207	BUSQUEDA DE CHLAMYDIA	HISOPADO	PORTALAMINILLAS CON 2 LAMINILLAS ROTULADAS. ENVIAR SECRECION SIN FIJAR. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-208	BUSQUEDA DE CRYPTOSPORIDIUM	HECES	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 10 G DE HECES FECALES RECIENTES DEL TAMAÑO DE UNA NUEZ. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1027	BUSQUEDA RAPIDA DE HONGOS Y LEVADURAS (KOH)	MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR LIMADURA DE UÑA , ESCARA, RASPADO O CUERO CABELLUDO. TEMPERATURA AMBIENTE.	2 DIAS
LB-209	CA 125 (OVARIO)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-210	CA 15-3 (MAMA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-211	CA 19-9 (PANCREAS-COLON)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-212	CA 27-29 (PULMON)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS



CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-213	CA 72-4 (ESTOMAGO)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-214	CADENAS KAPPA/LAMBDA (LIGERAS) EN ORINA	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-215	CADENAS KAPPA/LAMBDA (LIGERAS) EN SUERO (LIGERAS) EN SUEROANEXOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1028	CADMIO	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL EN EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	11 DIAS
LB-217	CALCIO EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-216	CALCIO EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-218	CALCIO IONIZADO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-219	CALCITONINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1168	CANCER DE MAMA (BRCA-BREAST CANCER) 1 Y 2	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA AMBIENTE.	6 DIAS

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-1029	CANNABINOIDES (MARIHUANA)	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-947	CANNABINOIDES (MARIHUANA) PRUEBA CONFIRMATORIA	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	10 DIAS
LB-964	CAPACIDAD DE UNION DE HIERRO TOTAL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1030	CARBAMAZEPINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1031	CARBOXIHEMOGLOBINA	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-220	CARGA VIRAL DE EPSTEIN BARR	SUERO, PLASMA CON EDTA, SANGRE TOTAL CON EDTA O LCR	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA AMBIENTE; TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 3 ML DE SUERO; TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3 ML PLASMA CON EDTA O CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 1 ML LIQUIDOCEFALORRAQUIDEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS




CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-1144	CARGA VIRAL DE HEPATITIS A	SANGRE TOTAL CON EDTA/ CITRATO, PLASMA CON EDTA/CITRATO O SUERO	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA; TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 3 ML DE SANGRE TOTAL CON CITRATO. TEMPERATURA AMBIENTE; TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3ML DE PLASMA CON EDTA; TAPON AZUL. ENVIAR 3 ML PLASMA CON CITRATO O TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 3 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	5 DIAS
LB-1032	CARGA VIRAL DE HERPES SIMPLEX IANEXOS	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-1033	CARGA VIRAL DE HERPES SIM-	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-1149	CARGA VIRAL DE PARVOVIRUS HUMANO B19	SANGRE TOTAL CON EDTA O PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA AMBIENTE O ENVIAR 1 ML DE PLASMA CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	5 DIAS
LB-1034	CARGA VIRAL PARA VIRUS BK (POLIOMAVIRUS)	PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON EDTA. TEMPERATURA DE CONGELACION.	4 DIAS
LB-227	CARIOTIPO EN SANGRE PERIFERICA (BANDAS C)	SANGRE TOTAL CON HEPARINA	TUBO TAPON VERDE. ENVIAR DE 3 A 5 ML DE SANGRE TOTAL CON HEPARINA. TEMPERATURA DE	9 DIAS
LB-228	CAROTENOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS



CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-229	CATECOLAMINAS TOTALES EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-230	CATECOLAMINAS TOTALES EN PLASMATRACHOMATIS	PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-231	CELULAS L-E (LUPUS ERITEMATOSO)	SANGRE TOTAL	TUBO TAPON ROJO. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL, NO CENTRIGUGAR. TEMPERATURA AMBIENTE.	2 DIAS
LB-1035	CEPA P/IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA	CEPA	CAJA PETRI DE PLASTICO. ENVIAR CEPA. TEMPERATURA AMBIENTE.	6 DIAS
LB-232	CERULOPLASMINA EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-233	CHLAMYDIA TRACHOMATIS POR PCR	HISOPADO	MEDIO DE TRANSPORTE ESPECIAL. ENVIAR CEPILLADO URETRAL/ VAGINAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-234	CICLOSPORINA	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1169	CINASAS DEL LINFOMA ANAPLASICO (ALK)	TEJIDO	TUBO DE MICROCENTRIFUGA. ENVIAR CORTES DE TEJIDO FFPE (5um); 1 BLOQUE FFPE O 3 LAMINILLAS CON TEJIDO FIJADO SIN TEÑIR. TEMPERATURA AMBIENTE.	6 DIAS

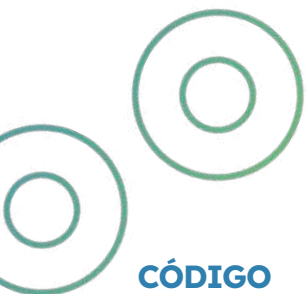

**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES
DE LA MUESTRA****PLAZO DE
ENTREGA**

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-235	CISTATINA C	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-449	CITOLOGIA CERVICO VAGINAL (PAPANICOLAU)	CEPILLADO CERVICO VAGINAL	PORTALAMINILLA CON 1 LAMINILLA ROTULADA. ENVIAR SECRECION FIJADA CON ALCOHOL AL 96°. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-236	CITOLOGIA DE MOCO FECAL	HECES	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 10 G DE HECES FECALES RECIENTES DEL TAMAÑO DE UNA NUEZ. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-238	CITOLOGIA URETRAL	EXUDADO	PORTALAMINILLA CON 1 LAMINILLA ROTULADA. ENVIAR SECRECION FIJADA CON ALCOHOL AL 96°. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-240	CITOQUIMICO Y CITOLOGICO DE LCR	LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 5 ML DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1039	CITOQUIMICO Y CITOLOGICO DE LIQUIDO DE ASCITIS O PERITONEAL	LIQUIDO DE ASCITIS O PERITONEAL	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 5 ML DE LIQUIDO DE ASCITIS O PERITONEAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1040	CITOQUIMICO Y CITOLOGICO DE LIQUIDO DE DIALISIS	LIQUIDO DE DIALISIS	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 5 ML DE LIQUIDO DE DIALISIS. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES
DE LA MUESTRA****PLAZO DE
ENTREGA**

LB-1041	CITOQUIMICO Y CITOLOGICO DE LIQUIDO PLEURAL	LIQUIDO PLEURAL Y SUERO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 5 ML DE LIQUIDO PLEURAL Y TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1037	CITOQUIMICO Y CITOLOGICO DE LIQUIDO SINOVIAL O ARTICULAR	LIQUIDO SINOVIAL O ARTICULAR	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 5 ML DE LIQUIDO SINOVIAL O ARTICULAR. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1038	CITOQUIMICO Y CITOLOGICO DE LIQUIDOS VARIOS	LIQUIDO O MATERIAL BIOLOGICO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 5 ML DE LIQUIDO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-242	CITRATOS EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-243	CLONAZEPAM (RIVOTRIL)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-244	CORO EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-246	CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINA A, TOXINA B, + GDH	HECES	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 10 G DE HECES FECALES RECIENTES DEL TAMAÑO DE UNA NUEZ. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS




CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES
DE LA MUESTRA****PLAZO DE
ENTREGA**

LB-1042	COAGLUTINACION DE LCR	LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	JERINGA ASEGURANDO EL EMBOLO. ENVIAR 2 ML DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-247	COBRE EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	9 DIAS
LB-248	COBRE EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	9 DIAS
LB-249	COCAINA	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-251	CALCIO EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-252	COLESTEROL HDL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-253	COLESTEROL LDL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-254	COLESTEROL VLDL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-255	COLESTEROLES HDL, LDL,VLDL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-256	COLINESTERASA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1043	COLINESTERASA ERITROCITARIA	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	11 DIAS
LB-257	COMPLEMENTO C3	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-258	COMPLEMENTO C4	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-259	COMPLEMENTO HEMOLITICO 50 (CH50)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1044	CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA	CEPA	CAJA PETRI DE PLASTICO CON AGAR GELOSA SANGRE. ENVIAR CEPA. TEMPERATURA AMBIENTE.	3 DIAS
LB-1045	CONFIRMATORIO PARA HBSAG	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS

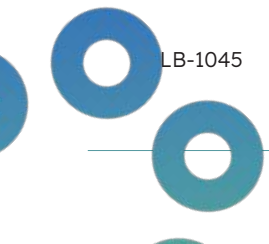


CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES
DE LA MUESTRA****PLAZO DE
ENTREGA**

LB-152	COOMBS DIRECTO (ANTICUERPOS ANTI RH ERITROCITARIOS)	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-153	COOMBS INDIRECTO (ANTICUERPOS ANTI RH EN SUEROS)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-260	COPROLOGICO	HECES	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 10 G DE HECES FECALES RECIENTES DEL TAMAÑO DE UNA NUEZ. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-261	COPROPARASITOSCOPICO 1 MUESTRA	HECES	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 10 G DE HECES FECALES RECIENTES DEL TAMAÑO DE UNA NUEZ. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-262	COPROPARASITOSCOPICO 2 MUESTRAS	HECES	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 10 G DE HECES FECALES RECIENTES DEL TAMAÑO DE UNA NUEZ. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-263	COPROPARASITOSCOPICO 3 MUESTRAS	HECES	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 10 G DE HECES FECALES RECIENTES DEL TAMAÑO DE UNA NUEZ. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-264	CORTISOL EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE	2 DIAS

**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES
DE LA MUESTRA****PLAZO DE
ENTREGA**

LB-265	CORTISOL EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1046	COXSACKIE VIRUS A ANTICUERPOS (IgG)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	13 DIAS
LB-1047	COXSACKIE VIRUS A ANTICUERPOS DEL GRUPO A	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	13 DIAS
LB-1048	COXSACKIE VIRUS A ANTICUERPOS DEL GRUPO B	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	13 DIAS
LB-266	CREATINA CINASA (CK)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-267	CREATINA CINASA MB (CK-MB)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-269	CREATININA EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-268	CREATININA EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

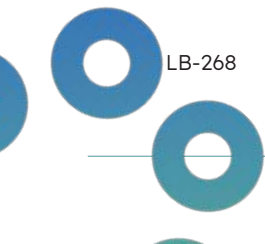

CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES
DE LA MUESTRA****PLAZO DE
ENTREGA**

LB-270	CRIOAGLUTININAS (AGLUTININAS FRIAS)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-271	CRIOGLOBULINAS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-273	CRISTALOGRAFIA DE MOCO CERVICAL	MOCO CERVICAL	PORTALAMINILLAS CON 1 LAMINILLA ROTULADA. ENVIAR MOCO CERVICAL SIN FIJAR. TEMPERATURA AMBIENTE.	2 DIAS
LB-275	CROMO EN ORINA	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	9 DIAS
LB-274	CROMO EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	9 DIAS
LB-1049	CROMOGRANINA A	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-1050	CUADRUPLE MARCADOR GESTACIONAL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-1051	CUENTA DE PLAQUETAS	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	1 DIAS

**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-1052	CULTIVO BALANOPREPUCLAL	HISOPADO	MEDIO DE TRASPORTE STUART Y LAMINILLA PARA TINCION DE GRAM. ENVIAR HISOPADO DE LA ZONA BALANOPREPUCLAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-280	CULTIVO DE	EXUDADO, LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	MEDIO DE TRANSPORTE STUART. ENVIAR EXUDADO O CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR MATERIAL BIOLÓGICO. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-281	CULTIVO DE ALIMENTOS	ALIMENTO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA O BOLSA DE CERRADO HERMETICO. ENVIAR 100 G DEL ALIMENTO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-1053	CULTIVO DE AMBIENTE	HISOPADO	CAJA PETRI DE PLASTICO CON AGAR SANGRE O AGAR CHOCOLATE SELLADA Y EN BOLSA CON CIERRE HERMETICO. ENVIAR SIEMBRA DE HISOPADO. TEMPERATURA AMBIENTE.	14 DIAS
LB-282	CULTIVO DE EXPECTORACION	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR FLEMA O EXPECTORACION. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-1054	CULTIVO DE EXUDADO CONJUNTIVAL	EXUDADO	MEDIO DE TRANSPORTE STUART. ENVIAR EXUDADO CONJUNTIVAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	3 DIAS



**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES
DE LA MUESTRA****PLAZO DE
ENTREGA**

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-283	CULTIVO DE EXUDADO FARINGEO	EXUDADO	MEDIO DE TRANSPORTE STUART. ENVIAR EXUDADO FARINGEO. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-284	CULTIVO DE EXUDADO NASAL	EXUDADO	MEDIO DE TRANSPORTE STUART. ENVIAR EXUDADO NASAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-1055	CULTIVO DE EXUDADO NASAL EN 2 NARINAS	EXUDADO	MEDIO DE TRANSPORTE STUART. ENVIAR EXUDADO NASAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-285	CULTIVO DE EXUDADO NASO-FARINGEO	EXUDADO	MEDIO DE TRANSPORTE STUART. ENVIAR EXUDADO NASOFARINGEO. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-286	CULTIVO DE EXUDADO OFTALMICO	EXUDADO	MEDIO DE TRANSPORTE STUART. ENVIAR EXUDADO OFTALMICO. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-287	CULTIVO DE EXUDADO OTICO	EXUDADO O SECRECION	MEDIO DE TRANSPORTE STUART. ENVIAR EXUDADO OPTICO O JERINGA Y LAMINILLA PARA TINCION DE GRAM. ENVIAR SECRECION. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-288	CULTIVO DE EXUDADO URETRAL	HISOPADO	MEDIO DE TRANSPORTE STUART O AMIES/CARBON ACTIVADO Y LAMINILLA PARA TINCION GRAM. ENVIAR EXUDADO URETRAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS



**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-289	CULTIVO DE EXUDADO VAGINAL	HISOPADO	MEDIO DE TRANSPORTE STUART O AMIES/ CARBON ACTIVADO, LAMINILLA PARA TINCION DE GRAM Y TUBO ESTERIL CON 1 ML DE SOLUCION SALINA ESTERIL SIN HISOPO (EXAMEN EN FRESCO). ENVIAR EXUDADO VAGINAL (NO VULVAR). TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-290	CULTIVO DE EXUDADO VULVAR	HISOPADO	MEDIO DE TRANSPORTE STUART O AMIES/CARBON ACTIVADO, LAMINILLA PARA TINCION DE GRAM Y TUBO ESTERIL CON 1 ML DE SOLUCION SALINA ESTERIL SIN HISOPO (EXAMEN EN FRESCO). ENVIAR EXUDADO VULVAR (NO VAGINAL). TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-291	CULTIVO DE HECES (COPROCULTIVO)	HECES	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 10 G DE HECES FECALES RECIENTES DEL TAMAÑO DE UNA NUEZ. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-1057	CULTIVO DE HERIDAS Y ABSCESOS	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA Y LAMINILLA PARA TINCION DE GRAM. ENVIAR LIQUIDO DE ABSCESO O HERIDA. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-1058	CULTIVO DE LIQUIDOS CORPORALES	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA, JERINGA CON EMBOLO FIJO Y SELLADA O TUBO ESTERIL SIN ADITIVO. ENVIAR 5 ML DE LIQUIDO CORPORAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS



CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES
DE LA MUESTRA****PLAZO DE
ENTREGA**

LB-1061	CULTIVO DE MYCOPLASMA HOMINIS	CEPILLADO URETRAL/ VAGINAL	CITOBUSH, HISOPO DRACON, RAYON, ALGINATO EN FRASCO O TUBO ESTERIL SIN ADITIVOS O EN MEDIO DE TRANSPORTE PARA MYCOPLASMA Y UREAPLASMA (SOLICITAR A LABORATORIO LABNOSTIC). ENVIAR CEPILLADO URETRAL O VAGINAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	3 DIAS
LB-1063	CULTIVO DE NEISSERIA GONORRHOEAE	HISOPADO	MEDIO DE TRASPORTE AMIES/CARBON ACTIVADO Y LAMINILLA PARA TINCION GRAM. ENVIAR HISOPADO. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-292	CULTIVO DE ORINA (UROCULTIVO)	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA O TUBO CON ACIDO BORICO. ENVIAR 10 ML DE MUESTRA DE ORINA. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-293	CULTIVO DE PUNTA DE CATETER	CATETER	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 5 CM DE LA PUNTA DE CATETER. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-294	CULTIVO DE SECRECION (DE HERIDA)	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA O TUBO ESTERIL Y LAMINILLA PARA TINCION GRAM . ENVIAR LIQUIDO DE SECRECION. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-295	CULTIVO DE SEMEN (ESPERMOCULTIVO)	LIQUIDO SEMINAL	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR LIQUIDO SEMINAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-296	CULTIVO DE SUPERFICIES INERTES	HISOPADO	MEDIO DE TRANSPORTE STUART. ENVIAR HISOPADO. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS



CÓDIGO


ESTUDIO

TIPO DE MUESTRA

CONDICIONES DE LA MUESTRA

PLAZO DE ENTREGA

LB-297	CULTIVO DE SUPERFICIES VIVAS	HISOPADO	MEDIO DE TRANSPORTE STUART. ENVIAR HISOPADO. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-299	CULTIVO DE UREAPLASMA UREALYTICUM	CEPILLADO URETRAL/ VAGINAL	CITOBURSH, HISOPO DRACON, RAYON, ALGINATO EN FRASCO O TUBO ESTERIL SIN ADITIVOS O EN MEDIO DE TRANSPORTE PARA MYCOPLASMA Y UREAPLASMA (SOLICITAR A LABORATORIO LABNOSTIC). ENVIAR CEPILLADO URETRAL O VAGINAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-300	CULTIVO DE VIBRIO CHOLERAEE	HECES	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 10 G DE HECES FECALES RECIENTES DEL TAMAÑO DE UNA NUEZ. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS
LB-301	CULTIVO MICOLOGICO (HONGOS NO LEVADURAS)	LIMADURA DE UÑA, ESCARA, RASPADOS O CUERO CABELLUDO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR LIMADURA DE UÑA, ESCARA O RASPADOSO CUERO CABELLUDO. TEMPERATURA AMBIENTE.	22 DIAS
LB-298	CULTIVO MICROBIOLÓGICO DE UÑAS	LIMADURA DE UÑA, ESCARA, RASPADO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA O EN SOBRE DE PAPEL CERRADO. ENVIAR UÑA AFECTADA O RASPADO (QUE NO SEA SUPERFICIAL). TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-302	CULTIVO PARA BUSQUEDA DE ANAEROBIOS	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	MEDIO DE HEMOCULTIVO PARA ANAEROBIOS O JERINGA SIN BURBUJA CON EMBOLO FIJO Y SELLADA. ENVIAR LIQUIDO BIOLÓGICO. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS

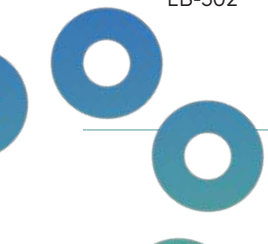


CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES
DE LA MUESTRA****PLAZO DE
ENTREGA**

LB-303	CULTIVO PARA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLÁSTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA O BOLSA DE PLÁSTICO CON CIERRE HERMÉTICO. ENVIAR EXPECTORACION, ASPIRACION BRONQUIAL, ORINA O LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. TEMPERATURA AMBIENTE.	43 DIAS
LB-375	CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA 2 H	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO POR CADA TOMA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-309	DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEA-SO4) (UROCULTIVO)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-308	DEHIDROEPIANDROSTERONA TOTAL (DHEA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-311	DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H Y SUERO BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLÁSTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL Y TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-312	DEPURACION DE UREA EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H Y SUERO	CONTENEDOR DE PLÁSTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL Y TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA	2 DIAS
LB-313	DESHIDROGENASA LACTICA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS



CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-1167	“DETECCION DE 4 MUTACIONES EN EL GEN BRAF”	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 4 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA O CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR TEJIDO. TEMPERATURA AMBIENTE.	22 DIAS
LB-450	DETECCION Y GENOTIPIFICACION DEL VPH POR PCR	CEPILLADO URETRAL/ VAGINAL; LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO; ORINA OCASIONAL	MEDIO DE TRANSPORTE 1ML PBS O SECO. ENVIAR CEPILLADO CERVICAL; CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 3 ML MUESTRA DE CITOLOGIA LIQUIDA; ENVIAR 20 ML DE ORINA O BLOQUE FFPE, ENVIAR CORTE DE TEJIDO (5um). TEMPERATURA DE	4 DIAS
LB-314	DIAZEPAM (VALIUM, ALBORAL)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-315	DIGOXINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-310	DIHIDROTESTOSTERONA (DHT)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-316	DIMERO D	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-317	DIOXIDO DE CARBONO (CO2)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-318	DOPAMINA EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS

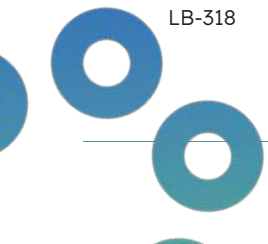


CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES
DE LA MUESTRA****PLAZO DE
ENTREGA**

LB-319	DOPAMINA EN PLASMA	PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-320	DUO MARCADOR GESTACIONAL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO POR CADA TOMA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-306	D-XILOSA EN SUERO A LOS 120 MINUTOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-305	D-XILOSA EN SUERO A LOS 60 MINUTOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-304	D-XILOSA EN SUERO BASAL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-1070	ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA ACIDA	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL EN EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-1072	ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA ALCALINA	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL EN EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-952	ELECTROFORESIS DE LIPOPROTEINAS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS
LB-1073	ELECTROFORESIS DE PROTEINAS EN LCR	LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	JERINGA ASEGURANDO EL EMBOLO. ENVIAR 2 ML DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS



CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-1074	ELECTROFORESIS DE PROTEINAS EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS
LB-1075	ELECTROFORESIS DE PROTEINAS EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-321	ELECTROLITOS EN SUERO (NA, K)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-322	ELECTROLITOS EN SUERO (NA,	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1077	ELECTROLITOS EN SUERO (NA, K, CL, CA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1078	ELECTROLITOS EN SUERO (NA, K, CL, CA, P, MG)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-323	ELECTROLITOS EN SUERO (NA, K, CL, CO2)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-324	ELECTROLITOS EN SUERO (NA, K, CL, LI)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-325	ELECTROLITOS EN SUERO (NA, K, LI)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

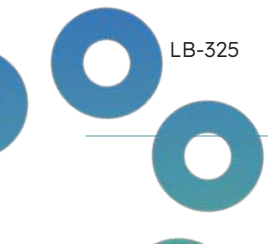


CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-1170	ENSAYO DE ANTIGENO UNICO (LSA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 3 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS
LB-237	EOSINOFILOS EN MOCO NASAL	EXUDADO	PORTALAMINILLAS CON 2 LAMINILLAS ROTULADAS POR NARINA. ENVIAR SECRECION SIN FIJAR. TEMPERATURA AMBIENTE.	2 DIAS
LB-326	ERITROPOYETINA (EPO)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 3 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-327	ESPERMATOBIOSCOPIA DIRECTA	LIQUIDO SEMINAL	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 5 ML DE LIQUIDO SEMINAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	2 DIAS
LB-328	ESPERMATOBIOSCOPIA INDIRECTA SIMS HUNHER (PRUEBA POSTCOITAL)	LIQUIDO O MATERIAL BIOLOGICO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ESCURRIMIENTO VAGINAL Y LAMINILLA CON MUESTRA CERVICAL Y VAGINAL. TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 14 H).	2 DIAS
LB-951	ESTERES DE COLESTEROL	SUERO	TUBO TAPON ROJO. ENVIAR 4 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	11 DIAS
LB-329	ESTRADIOL (E2)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-330	ESTRIOL NO CONJUGADO (UE3)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-331	ESTROGENOS TOTALES	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-332	ESTRONA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-333	EXAMEN EN FRESCO	CEPILLADO O HISOPADO	TUBO DE PLASTICO SECO SIN ADITIVOS, ESTERIL, BIEN SELLADO. ENVIAR HISOPO CON SOLUCION SALINA. TEMPERATURA AMBIENTE.	2 DIAS
LB-334	EXAMEN GENERAL DE ORINA	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	1 DIAS
LB-1145	CARGA VIRAL CITOMEGALOVIRUS	SANGRE TOTAL CON EDTA O PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA AMBIENTE O ENVIAR 1 ML DE PLASMA CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-336	FACTOR II DE LA COAGULACION	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 3 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE CONGELACION.	4 DIAS
LB-337	FACTOR IX DE LA COAGULACION	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 3 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE CONGELACION.	4 DIAS
LB-338	FACTOR REUMATOIDE CUANTITATIVO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-339	FACTOR V DE LA COAGULACION	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 3 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE CONGELACION.	4 DIAS
LB-341	FACTOR VII DE LA COAGULACION	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 3 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE CONGELACION.	4 DIAS

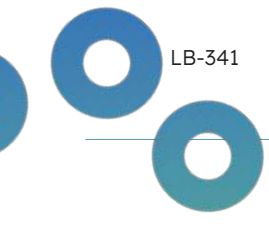


CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-342	FACTOR VIII DE LA COAGULACION(LSA)	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 3 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE CONGELACION.	4 DIAS
LB-343	FACTOR VON WILLEBRAND ANTIGENICO	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 3 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE CONGELACION.	4 DIAS
LB-344	FACTOR X DE LA COAGULACION	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 3 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE CONGELACION.	4 DIAS
LB-345	FACTOR XI DE LA COAGULACION	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 3 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE CONGELACION.	4 DIAS
LB-346	FACTOR XII DE LA COAGULACION	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 3 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE CONGELACION.	4 DIAS
LB-348	FENILALANINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-349	FENILALANINA NEONATAL	SANGRE EN PAPEL FILTRO	TARJETA GUTHRIE. ENVIAR 2 CIRCULOS DE SANGRE TOTAL. TEMPERATURA AMBIENTE VER ANEXO X (Toma de muestra para tamiz neonatal).	4 DIAS
LB-350	FENITOINA (DFH)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-351	FENOBARBITAL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-352	FERRITINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-353	FIBRINOGENO	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 3 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE CONGELACION.	2 DIAS
LB-354	FILTRADO GLOMERULAR (TASA DE FILTRACION GLOMERULAR (GFRE)) EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-357	FOSFATASA ACIDA FRACCION PROSTATICA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-358	FOSFATASA ACIDA TOTAL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-359	FOSFATASA ALCALINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-360	FOSFOLIPIDOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-362	FOSFORO EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-361	FOSFORO EN SUERO	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

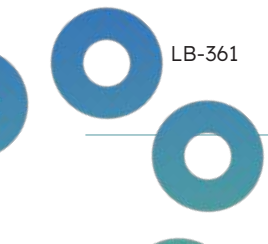


CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES
DE LA MUESTRA****PLAZO DE
ENTREGA**

LB-363	FRACCION BETA LIBRE DE HGC SERICA (CUANTITATIVA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-364	FRAGILIDAD OSMOTICA DE ERITROCITOS	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL EN EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-365	FROTIS DE SANGRE PERIFERICA	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL EN EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	1 DIAS
LB-366	FRUCTOSA EN SEMEN	LIQUIDO SEMINAL	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 2 ML DE LIQUIDO SEMINAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-367	FRUCTOSAMINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1088	GABAPENTINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6DIAS
LB-1089	GALACTOMANANO (ANTIGENO GALACTOMANANO DE ASPERGILLUS)	SUERO O LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR LAVADO BORNCOALVEOLAR O TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS
LB-368	GALACTOSA TOTAL	SANGRE EN PAPEL FILTRO	TARJETA GUTHRIE. ENVIAR 2 CIRCULOS DE SANGRE TOTAL. TEMPERATURA AMBIENTE VER ANEXO X (Toma de muestra para tamiz neonatal).	4 DIAS
LB-369	GALACTOSA URIDIL TRANSFERASA	SANGRE EN PAPEL FILTRO	TARJETA GUTHRIE. ENVIAR 2 CIRCULOS DE SANGRE TOTAL. TEMPERATURA AMBIENTE VER ANEXO X (Toma de muestra para tamiz neonatal).	4 DIAS

**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-370	GAMMA GLUTAMILTRANSFERASA (GGT)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-371	GASTRINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-373	GLOBULINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1079	GLOBULINA TRANSPORTADORA DE HORMONAS SEXUALES	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS
LB-954	GLUCAGON	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1090	GLUCAGON 120 MIN	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1091	GLUCAGON 30 MIN	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1092	GLUCAGON 60 MIN	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1093	GLUCAGON 90 MIN	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS

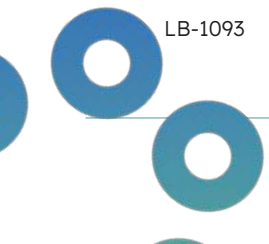


CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-379	GLUCOSA 120 MINUTOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-380	GLUCOSA 180 MINUTOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-381	GLUCOSA 240 MINUTOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-376	GLUCOSA 30 MINUTOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1182	GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-969	GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA (NEONATAL)	SANGRE EN PAPEL FILTRO	TARJETA GUTHRIE. ENVIAR 2 CIRCULOS DE SANGRE TOTAL. TEMPERATURA AMBIENTE VER ANEXO X (Toma de muestra para tamiz neonatal).	4 DIAS
LB-377	GLUCOSA 60 MINUTOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-378	GLUCOSA 90 MINUTOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-382	GLUCOSA BASAL Y POSPRANDIAL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS



CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-1094	GLUCOSA EN LCR	LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	JERINGA ASEGURANDO EL EMBOLO. ENVIAR 2 ML DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-374	GLUCOSA EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-383	GLUCOSA POSPRANDIAL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-384	GLUCOSA URINARIA	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-385	GOTA GRUESA (INVESTIGACION DE PLASMODIUM SP)	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL EN EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-386	GRASA EN HECES (CUALITATIVO)	HECES	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 10 G DE HECES FECALES RECIENTES DEL TAMAÑO DE UNA NUEZ. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-387	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL EN EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	1 DIAS
LB-389	HAPTOGLOBINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-390	HEMOCULTIVO	SANGRE TOTAL	MEDIO ESPECIAL. ENVIAR SANGRE TOTAL, ESPECIFICANDO EL DIA Y SITIO DE TOMA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS

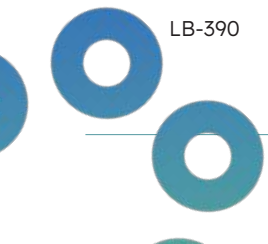


CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES
DE LA MUESTRA****PLAZO DE
ENTREGA**

LB-391	HEMOGLOBINA GLUCOSILADA (HB A1C)	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL EN EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-948	HEMOGLOBINA TOTAL	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL EN EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1095	HIDROXIPROLINA EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-393	HIERRO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1096	HISTAMINA	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL EN EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	13 DIAS
LB-396	HOMOCISTEINA	SUERO O PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO O TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-397	HORMONA ADRENOCORTICOTROFICA (ACTH)	PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-398	HORMONA ANTI - MULLERIA- NA (MRH/AMH)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	7 DIAS
LB-1097	HORMONA DE CRECIMIENTO A LOS 120 MIN	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-1098	HORMONA DE CRECIMIENTO A LOS 150 MIN	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1099	HORMONA DE CRECIMIENTO A LOS 180 MIN	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1100	HORMONA DE CRECIMIENTO A LOS 210 MIN	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1101	HORMONA DE CRECIMIENTO A LOS 240 MIN	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1102	HORMONA DE CRECIMIENTO A LOS 30 MIN	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1103	HORMONA DE CRECIMIENTO A LOS 60 MIN	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1104	HORMONA DE CRECIMIENTO A LOS 90 MIN	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-399	HORMONA DE CRECIMIENTO BASAL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-400	HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

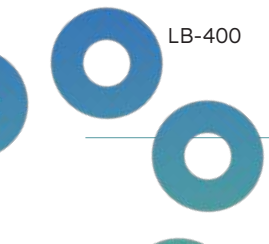


CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-401	HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES NEONATAL	SANGRE EN PAPEL FILTRO	TARJETA GUTHRIE. ENVIAR 2 CIRCULOS DE SANGRE TOTAL. TEMPERATURA AMBIENTE VER ANEXO X (Toma de muestra para tamiz neonatal).	4 DIAS
LB-402	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-403	HORMONA LUTEINIZANTE (LH)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-404	HORMONA PARATIROIDEA (PARATHORMONA/ PTH-INTACTA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1105	IDENTIFICACION DE LEVADURAS Y PRUEBAS DE SENSIBILIDAD A ANTIFUNGICOS	HISOPADO	CAJA PETRI DE PLASTICO CON AGAR DEXTROSA-SABORAUD SELLADA Y MEDIO DE TRANSPORTE STUAR. ENVIAR HISOPADO DE VIAS RESPIRATORIAS ALTAS. TEMPERATURA AMBIENTE.	6 DIAS
LB-405	INDICE DE TIROXINA LIBRE (ITL)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-406	INFLUENZA A/B POR PCR	EXUDADO O HISOPADO	MEDIO DE TRANSPORTE. ENVIAR EXUDADO/ HISOPADO NASOFARINGEO O CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ASPIRADO NASOFARINGEO, 1 ML DE LAVADO BRONCOALVEOLAR. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-388	INFLUENZA TIPO A Y B (PRUEBA RAPIDA)	HISOPADO	TUBO DE PLASTICO SECO SIN ADITIVOS, ESTERIL, BIEN SELLADO. ENVIAR ESCOBILLON O HISOPADO NASOFARINGEA, IDENTIFICADOS POR CADA NARINA. TEMPERATURA AMBIENTE.	2 DIAS

**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-407	INHIBIDOR DE ESTERASA DE C1	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS
LB-1106	INHIBIDOR DE FACTOR DE COAGULACION IX	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 3 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE CONGELACION.	4 DIAS
LB-1107	INHIBIDOR DE FACTOR DE COAGULACION VIII	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 3 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE CONGELACION.	4 DIAS
LB-1108	INHIBIDOR FUNCIONAL DE ESTERASA C1	ORINA	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-408	INHIBINA A	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS
LB-959	INMUNOFENOTIPO EN MEDULA OSEA	MEDULA OSEA	JERINGA ASEGURANDO EL EMBOLO. ENVIAR MEDULA OSEA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-409	INMUNOFENOTIPO EN SANGRE PERIFERICA	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 10 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-239	INMUNOFENOTIPO PARA HEMOGLOBINA PAROXISTICA NOCTURNA (HPN)	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 10 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-960	INMUNOFIJACION DE PROTEINAS EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS

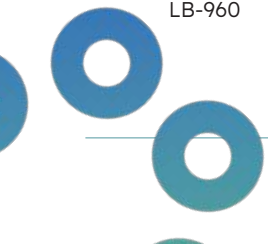


CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-963	INMUNOFIJACION DE PROTEINAS EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-939	INMUNOGLOBULINA A	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-950	INMUNOGLOBULINA D	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-945	INMUNOGLOBULINA E	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-411	INMUNOGLOBULINA G EN LCR	LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	JERINGA ASEGURANDO EL EMBOLO. ENVIAR 2 ML DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	13 DIAS
LB-410	INMUNOGLOBULINA G EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-412	INMUNOGLOBULINA M	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1113	INMUNOGLOBULINAS A, G, M, E	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-413	INMUNOGLOBULINAS EN LCR	LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	JERINGA ASEGURANDO EL EMBOLO. ENVIAR 2 ML DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS

**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-414	INMUNOGLOBULINAS G (IGG) SUBCLASES 1, 2, 3, 4	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-415	INMUNOTRIPSINA REACTIVA (IRT)	SANGRE EN PAPEL FILTRO	TARJETA GUTHRIE. ENVIAR 2 CIRCULOS DE SANGRE TOTAL. TEMPERATURA AMBIENTE VER ANEXO X (Toma de muestra para tamiz neonatal).	4 DIAS
LB-1118	INSULINA A LOS 120 MIN	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1119	INSULINA A LOS 180 MIN	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1120	INSULINA A LOS 240 MIN	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1115	INSULINA A LOS 30 MIN	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1121	INSULINA A LOS 300 MIN	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1117	INSULINA A LOS 90 MIN	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-416	INSULINA BASAL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

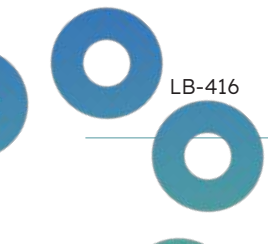

CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES
DE LA MUESTRA****PLAZO DE
ENTREGA**

LB-1116	INSULINA LOS 60 MIN	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-417	INSULINA POSPRANDIAL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-250	INTERLEUCINA-6	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-418	ISOENZIMAS DE CPK	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-419	ISOENZIMAS DE FOSFATASA ALCALINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-420	ISOENZIMAS DE LACTATO DESHIDROGENASA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-424	LAMOTRIGINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	9 DIAS
LB-241	LEPTINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS

**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-1147	LEPTOSPIRA (DETECCION/ CUALITATIVO)	SANGRE TOTAL CON EDTA, ORINA, LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA; CONTENEDOR DE PLÁSTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA: 2 ML DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO O BIOPSIA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION	5 DIAS
LB-307	LEVETIRACETAM (KEPPRA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	7 DIAS
LB-946	LINFOCITOS CD4, CD8	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS
LB-955	LINFOCITOS INMUNORREGULADORES CON SUBPOBLACION DE T Y B	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS
LB-958	LINFOCITOS T, B Y NK	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1114	LIPASA EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLÁSTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-962	LIPASA EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-949	LIPIDOS TOTALES	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS




CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES
DE LA MUESTRA****PLAZO DE
ENTREGA**

LB-425	LISIS DE EUGLOBULINAS	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-426	LITIO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-272	LITO RENAL O BILIAR (ESTUDIO QUIMICO DE CALCULOS)	LITO/CALCULO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR LITO SECO. TEMPERATURA AMBIENTE .	4 DIAS
LB-429	MAGNESIO EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-428	MAGNESIO EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1112	MERCURIO	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	11 DIAS
LB-430	METAHEMOGLOBINA	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	5 DIAS
LB-432	METANEFRINAS TOTALES EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-431	METANEFRINAS TOTALES EN PLASMA	PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS

**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-1111	METANFETAMINAS EN ORINA	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-433	METANOL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1110	METOTREXATO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1132	MICOBACTERIAS	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 1 ML DE ESPUTO; 3 ML DE LAVADO BRONQUIAL O CULTIVO SOLIDO (OGAWA). TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-434	MICROALBUMINA EN ORINA OCASIONAL O DE 24 H	ORINA O ALICUOTA DE ORINA DE 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML ORINA OCASIONAL O 20 ML DE ALICUOTA DE ORINA DE 24 HORAS INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-435	MIOGLOBINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-436	MONOTEST (PAUL-BUNELL) (ANTICUERPOS IGM HETEROFILOS)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1175	MUTACIONES ASOCIADAS A LEUCEMIAS (HEMAVISION® 28Q)	SANGRE TOTAL CON EDTA O MEDULA OSEA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA O JERINGA ASEGURANDO EMBOLO. ENVIAR 3ML DE MEDULA OSEA. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS

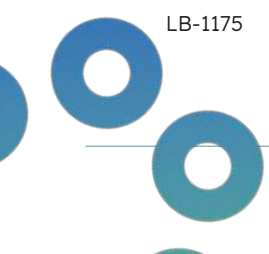


CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-1109	MYCOBACTERIAS ATIPICAS GENOTIPIFICACION POR PCR	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA O JERINGA ESTERIL. ENVIAR 10 ML DE LIQUIDO CORPORAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	11 DIAS
LB-437	MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA O JERINGA ESTERIL. ENVIAR 10 ML DE LIQUIDO CORPORAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	11 DIAS
LB-438	MYCOPLASMA GENITALIUM POR PCR	CEPILLADO URETRAL/ VAGINAL	MEDIO DE TRANSPORTE ESPECIAL. ENVIAR CEPILLADO URETRAL/ CERVICO-VAGINAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	11 DIAS
LB-977	NEISSERIA GONORRHOEAE POR PCR	CEPILLADO URETRAL/ VAGINAL	MEDIO DE TRANSPORTE ESPECIAL. ENVIAR CEPILLADO URETRAL/ CERVICO-VAGINAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-440	NICOTINA EN ORINA (COTININA)	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-968	NICOTINA EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-441	NITROGENO UREICO (BUN)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-442	NITROGENO UREICO EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-943	NORADRENALINA EN ORINA DE 24 HORAS	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS

**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-944	NORADRENALINA EN PLASMA	PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-439	N-TELOPEPTIDOS EN ORINA	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	11 DIAS
LB-443	OPIACEOS EN ORINA	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-445	OSMOLARIDAD EN ORINA	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-444	OSMOLARIDAD EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-446	OSTEOCALCINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-447	OXALATOS EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-448	OXCARBAZEPINA (TRILEPTAL)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	9 DIAS

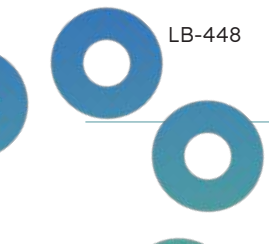




CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-1148	PARECHOVIRUS (DETECCION/ CUALITATIVO)	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLÁSTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 1 ML DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS
LB-1146	PCR VIRUS DEL DENGUE Y GENOTIPIFICACION	SANGRE TOTAL CON EDTA, PLASMA CON EDTA, SUERO, ORINA, TEJIDO O LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3 ML SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA AMBIENTE; TUBO TAPON LILA. ENVIAR 1ML DE PLASMA CON EDTA; TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 1 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION; CONTENEDOR DE PLÁSTICO, ESTERIL Y TAPA DE ROSCA. ENVIAR MUESTRAS DE AUTOPSIA O TEJIDO ANIMAL 1G. TEMPERATURA AMBIENTE O CONTENEDOR ESTERIL CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-451	PEPTIDO C	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-452	PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL TIPO B (BNP)	PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1083	PLASMINOGENO (PLASMINOGENICO FUNCIONAL)	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 3 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE CONGELACION.	4 DIAS
LB-1150	PLASMODIUM (DETECCION/ CUALITATIVO)	SANGRE TOTAL CON EDTA, ORINA, HISOPADO O LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA AMBIENTE; CONTENEDOR DE PLÁSTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA O MEDIO (PBC, THINPREP®). ENVIAR 1-3 ML DE HISOPADO BUCAL E MEDIO O SECO; ENVIAR 1-3 ML DE SALIVA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS



**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES
DE LA MUESTRA****PLAZO DE
ENTREGA**

LB-1082	PLOMO EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	5 DIAS
LB-1081	PLOMO EN SUERO	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL EN EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	5 DIAS
LB-1151	PNEUMOCYSTIS JIROVECI (P. CARINII) (DETECCION/ CUALITATIVO)(P. CARINII) (DETECCION/CUALITATIVO)	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR EXPECTORACION Y/O LAVADO BRONQUIAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-1080	PORFOBILINOGENO EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-454	POTASIO EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-453	POTASIO EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-455	PREALBUMINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-456	PREGNANTRIOL EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 100 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	13 DIAS

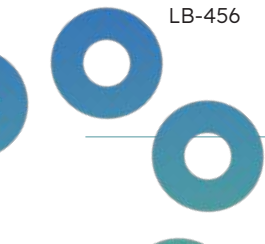


CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-457	PRIMIDONA (MYSOLINE)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS
LB-458	PROCALCITONINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-459	PROGESTERONA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-460	PROLACTINA SERICA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-461	PROTEINA A (PAPP-A)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-462	PROTEINA C DE LA COAGULACION	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 3 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE CONGELACION.	4 DIAS
LB-463	PROTEINA C REACTIVA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-464	PROTEINA C REACTIVA ULTRA SENSIBLE	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1076	PROTEINA DE CRECIMIENTO PLACENTARIO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS

**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-465	PROTEINAS DE LA COAGULACION	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 3 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE CONGELACION.	7 DIAS
LB-466	PROTEINAS DE BENCE JONES	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-467	PROTEINAS EN LCR	LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	JERINGA ASEGURANDO EL EMBOLO. ENVIAR 2 ML DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-468	PROTEINAS EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-469	PROTEINAS TOTALES	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-470	PROTEINAS TOTALES CON RELACION A/G	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1179	PRUEBA CRUZADA LINFOCITARIA (DONADOR CADAVERICO)	SUERO	TUBO TAPON AMARILLO. ENVIAR 8 ML DE SANGRE TOTAL CON ACD DEL DONADOR Y TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO DEL RECEPTOR. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1178	PRUEBA CRUZADA LINFOCITARIA (DONADOR VIVO)	SUERO	TUBO TAPON AMARILLO. ENVIAR 8 ML DE SANGRE TOTAL CON ACD DEL DONADOR Y TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO DEL RECEPTOR. TEMPERATURA DE REFRIGERACION..	2 DIAS

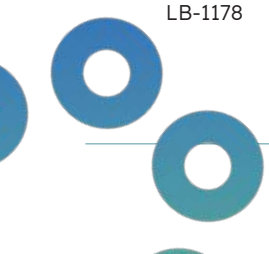


CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-471	PRUEBA INMUNOLOGICA DE EMBARAZO EN ORINA	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-472	PRUEBA INMUNOLOGICA DE EMBARAZO EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1071	PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD (CRUZADAS)	SUERO Y SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO Y TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA DE DONADORES Y RECEPTOR. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-953	PYRILINKS-D (DEOXIPIRINOLINA)	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-473	REACCIONES FEBRILES	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-474	REAGINAS PLASMATICAS RAPIDAS (PRP)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1181	RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO (EGFR)	TEJIDO	TUBO DE MICROCENTRIFUGA. ENVIAR CORTES DE TEJIDO FFPE (5um); 1 BLOQUE FFPE O 2 LAMINILLAS CON TEJIDO FIJADO SIN TEÑIR. TEMPERATURA AMBIENTE.	6 DIAS
LB-1069	RELACION ALBUMINA/ CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-475	RENINA	PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-1140	RESISTENCIA A FARMACOS PARA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLÁSTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 1-3 ML DE ESPUTO; 3 ML DE LAVADO BRONQUIAL O CULTIVO SÓLIDO (OGAWA). TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DÍAS
LB-1068	RESISTENCIA A LA INSULINA (HOMA-IR)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN.	3 DÍAS
LB-476	RESISTENCIA A LA PROTEÍNA C ACTIVADA	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN.	4 DÍAS
LB-1067	RESISTENCIA A LA PROTEÍNA S ACTIVADA	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN.	4 DÍAS
LB-477	RETICULOCITOS	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN.	2 DÍAS
LB-478	ROSA DE BENGALA (ANTICUERPOS ANTI-BRUCELLA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN.	2 DÍAS
LB-479	ROTAVIRUS EN HECES	HECES	CONTENEDOR DE PLÁSTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 10 G DE HECES FECALES RECIENTES DEL TAMAÑO DE UNA NUEZ. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN.	2 DÍAS
LB-1152	RUBEOLA (DETECCIÓN/ CUALITATIVO)	SANGRE TOTAL CON EDTA, PLASMA CON EDTA O LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA AMBIENTE; CONTENEDOR DE PLÁSTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 3 ML DE LIQUIDO AMNIOTICO, 1 ML DE SALIVA, 1 G DE CORDON UMBILICAL; TUBO TAPON LILA. ENVIAR 1 ML DE PLASMA CON EDTA O HISOPADO OROFARINGEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN.	4 DÍAS

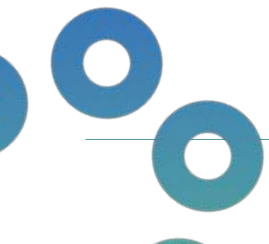

CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-480	SALICILATOS (ACIDO ACETILSALICILICO)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-481	SANGRE OCULTA EN HECES (GUAYACO)	HECES	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 10 G DE HECES FECALES RECIENTES DEL TAMAÑO DE UNA NUEZ. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-482	SARS- COV-2 IgG/IgM	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-483	SARS-COV-2 (RNA)	HISOPADO	MEDIO UNIVERSAL VIRAL O SECO. ENVIAR HISOPADO NASOFARINGEO O FARINGEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-484	SEROTONINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	5 DIAS
LB-485	SIROLIMUS(RAPAMYCIN)	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-487	SODIO EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-486	SODIO EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-489	SOMATOMEDINA C (IGFBP-3)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS



CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-488	SOMATOMEDINA C (IGF-I)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-490	SOMATOTROPINA (GH)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-493	T3 UPTAKE	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-494	TACROLIMUS (PROGRAF)	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1066	TAMIZAJE DE HEMOGLOBINAS EN TAMIZ NEONATAL	SANGRE EN PAPEL FILTRO	TARJETA GUTHRIE. ENVIAR 2 CIRCULOS DE SANGRE TOTAL. TEMPERATURA AMBIENTE VER ANEXO X (Toma de muestra para tamiz neonatal).	4 DIAS
LB-495	TESTOSTERONA LIBRE	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-496	TESTOSTERONA TOTAL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-497	TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1064	TIEMPO DE REPTILASA	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS



CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-498	TIEMPO DE TROMBINA (TT)	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-499	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADO (TTPA)	PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-500	TINCION DE GRAM	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	PORTALAMINILLAS CON 1 LAMINILLA ROTULADA. ENVIAR LIQUIDO CORPORAL EXTENDIDO SIN FIJAR. TEMPERATURA AMBIENTE.	2 DIAS
LB-501	TINCION DE TINTA CHINA	LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	PORTALAMINILLA CON 1 LAMINILLA ROTULADA. ENVIAR LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO SIN FIJAR. TEMPERATURA AMBIENTE.	2 DIAS
LB-502	TINCION DE WRIGHT	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-503	TINCION DE ZIEHL-NEELSEN	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA, TUBO ESTERIL O JERINGA ESTERIL. ENVIAR LIQUIDO CORPORAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	2 DIAS
LB-504	TIROGLOBULINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-505	TIROXINA (T4) CAPTACION	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-506	TIROXINA (T4) LIBRE	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS



CÓDIGO	ESTUDIO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-507	TIROXINA (T4) NEONATAL	SANGRE EN PAPEL FILTRO	TARJETA GUTHRIE. ENVIAR 2 CIRCULOS DE SANGRE TOTAL. TEMPERATURA AMBIENTE VER ANEXO X (Toma de muestra para tamiz neonatal).	4 DIAS
LB-508	TIROXINA (T4) TOTAL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-509	TIROXINA (T4) YODO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1062	TOPIRAMATO (TOPAMAX)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	11 DIAS
LB-1060	TOXOPLASMA GONDII POR PCR	SANGRE EN PAPEL FILTRO	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-510	TRANSFERRINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1059	TRANSGLUTAMINASA TISULAR (TTG)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-1153	TREPONEMA PALLIDUM (DETECCION/CUALITATIVO)	HISOPADO, PLASMA CON EDTA, LIQUIDO O MATERIAL BIOLOGICA, EXUDADO O TEJIDO.	MEDIO DE TRANSPORTE. ENVIAR HISOPADO UROGENITAL, ANAL Y ORAL; CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 1 ML LIQUIDO AMNIOTICO; TUBO TAPON LILA. ENVIAR 1 ML DE PLASMA CON EDTA; MEDIO DE TRANSPORTE. ENVIAR EXUDADO DE LESIONES Y DESCARGA DE LESIONES ULCEROSAS EROSIVAS O TEJIDO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS



CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-511	TRIGLICERIDOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-512	TRIPLE MARCADOR GESTACIONAL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-513	TRIPTASA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	13 DIAS
LB-514	TRİYODOTIRONINA (T3) LIBRE	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-515	TRİYODOTIRONINA (T3) TOTAL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-516	TROPONINA I CARDIACA (CTNI)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-517	TROPONINA T CARDIACA (CTNT)	PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-1154	TRYPANOSOMA CRUZI	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-519	UREA EN ORINA 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-518	UREA EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-520	UROPORFIRINAS TOTALES EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 50 ML DE ORINA DE 24 HORAS PROTEJER DE LA LUZ. INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL.TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	15 DIAS
LB-521	V.D.R.L. (REACCIONES SEROLUETICAS)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-522	VASOPRESINA (HORMONA ANTIDIURETICA)	PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-523	VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR (VSG)	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1155	VIRUS BK Y JC	PLASMA CON EDTA, ORINA O LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 1 ML DE PLASMA CON EDTA; CONTENEDOR PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA O 1 ML DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	5 DIAS
LB-1157	VIRUS DE HERPES I Y II (DETECCION/CUALITATIVO/DIFERENCIACION)	SANGRE TOTAL CON EDTA, PLASMA CON EDTA, ORINA, EXUDADO, HISOPADO, LIQUIDO O MATERIAL BIOLOGICO	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA AMBIENTE; ENVIAR 1ML DE PLASMA CON EDTA; CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 1 ML DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO; EXUDADO UROGENITAL; HISOPADO DE LA LESION; 20 ML DE ORINA O LIQUIDO PROSTATICO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS




CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-1141	VIRUS DE PAPILOMA HUMANO (VPH) 15 GENOTIPOS	CEPILLADO URETRAL/ VAGINAL; LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO; ORINA OCASIONAL	MEDIO DE TRANSPORTE 1ML PBS O SECO. ENVIAR CEPILLADO CERVICAL; CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 3 ML MUESTRA DE CITOLOGÍA LIQUIDA; ENVIAR 20 ML DE ORINA O BLOQUE FFPE, ENVIAR CORTE DE TEJIDO (5µm). TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-1142	VIRUS DE PAPILOMA HUMANO (VPH) 28 GENOTIPOS	CEPILLADO URETRAL/ VAGINAL; LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO; ORINA OCASIONAL	MEDIO DE TRANSPORTE 1ML PBS O SECO. ENVIAR CEPILLADO CERVICAL; CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 3 ML MUESTRA DE CITOLOGÍA LIQUIDA; ENVIAR 20 ML DE ORINA O BLOQUE FFPE, ENVIAR CORTE DE TEJIDO (5µm). TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-1159	VIRUS EPSTEIN BARR (DETECCION/CUALITATIVO)	SUERO, SANGRE TOTAL CON EDTA, PLASMA CON EDTA O LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 3 ML DE SUERO; TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA O PLASMA CON EDTA: CONTENEDOR PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA O JERINGA ASEGURANDO EMBOLO. ENVIAR 1ML DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1143	VIRUS HERPES SIMPLE 6, 7 Y 8	SUERO, SANGRE TOTAL CON EDTA, PLASMA CON EDTA, LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO, LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 1 ML DE PLASMA CON EDTA; 3 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 1 ML DE SUERO; CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y DE TAPA DE ROSCA. ENVIAR 1 ML DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO; BIOPSIA DE LESIONES ORALES O CUTANEAS (BLOQUE FFPE; 2 LAMINILLAS CON TEJIDO FIJADO, CORTES DE TEJIDO FFPE (5µm)). TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS

**CÓDIGO****ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-1160	VIRUS TOSCANA (DETECCION/ CUALITATIVO)	LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	JERINGA ASEGURANDO EL EMBOLO. ENVIAR 1ML LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	5 DIAS
LB-1161	VIRUS VARICELA ZOSTER (DETECCION/CUALITATIVO)	LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	JERINGA ASEGURANDO EL EMBOLO. ENVIAR 1ML LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-524	VITAMINA A (RETINOL)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	17 DIAS
LB-525	VITAMINA B1 (TIAMINA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	9 DIAS
LB-526	VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-527	VITAMINA B6 (PIRIDOXINA)	PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON EDTA PROTEGIDO DE LA LUZ. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	12 DIAS
LB-528	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	13 DIAS
LB-529	VITAMINA D (25 OH) (CALCIFEROL, 25 HIDROXI VITAMINA D TOTAL)	SUERO	TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-530	VITAMINA E (ALFA GAMMA TOCOFEROL)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO PROTEGIDO DE LA LUZ. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	12 DIAS

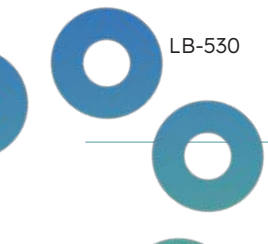

CÓDIGO**ESTUDIO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES
DE LA MUESTRA****PLAZO DE
ENTREGA**

LB-531	VITAMINA K	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	13 DIAS
LB-532	WESTERN BLOT (CONFIRMATORIA P/VIH 1)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-533	WESTERN BLOT (CONFIRMATORIA P/VIH 2)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-534	WESTERN BLOT PARA EL VIRUS DE LA HEPATITIS C	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-535	YODO BUTANOLICO (IB)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-536	YODO PROTEICO (IP)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1056	ZIKA POR PCR	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	8 DIAS
LB-537	ZINC EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	9 DIAS
LB-538	ZINC EN SUERO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	5 DIAS

A person wearing a blue lab coat and blue gloves is using a pipette to transfer a red liquid into a small vial. The background is a laboratory setting with various pieces of equipment. The text 'CATÁLOGO DE PANELES Y PERFILES' is overlaid in white on the bottom right of the image.

CATÁLOGO DE PANELES Y PERFILES



ESTUDIO

CONTENIDO

TIPO DE MUESTRA


CONDICIONES DE LA MUESTRA

PLAZO DE ENTREGA

LB-1124	ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 1	CHLAMYDIA TRACHOMATIS, NEISSERIA GONORRHOEAE	ORINA, EXUDADO/ HISOPADO O CITOLOGIA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA; 1 ML DE MEDIO DE TRANSPORTE (PBS ESTERIL O SECO). ENVIAR HISOPADO URETRAL, VAGINAL Y/O CERVICAL O CITOLOGIA EN BASE LIQUIDA 3 ML. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-1125	ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 2	CHLAMYDIA TRACHOMATIS, NEISSERIA GONORRHOEAE, MYCOPLASMA GENITALIUM, MYCOPLASMA HOMINIS, UREAPLASMA UREALYTICUM, UREAPLASMA PARVUM Y TRICHOMONAS VAGINALIS	ORINA, EXUDADO/ HISOPADO O CITOLOGIA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA; 1 ML DE MEDIO DE TRANSPORTE (PBS ESTERIL O SECO). ENVIAR HISOPADO URETRAL, VAGINAL Y/O CERVICAL O CITOLOGIA EN BASE LIQUIDA 3 ML. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-1126	ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 3	CHLAMYDIA TRACHOMATIS, NEISSERIA GONORRHOEAE, MYCOPLASMA GENITALIUM, MYCOPLASMA HOMINIS, UREAPLASMA UREALYTICUM, UREAPLASMA PARVUM Y TRICHOMONAS VAGINALIS, HERPES VIRUS I, HERPES VIRUS II, TREPONEMA PALLIDUM, CANDIDA ALBICANS Y GARDNERELLA VAGINALIS.	EXUDADO/HISOPADO U ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA O 1 ML DE MEDIO DE TRANSPORTE (PBS, THINPREP O SECO). ENVIAR HISOPADO UROGENITAL/ RECTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-1127	ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 1 (VIRAL)	VIRUS DE LA INFLUENZA A, VIRUS DE LA INFLUENZA B, VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO A, VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO B, INFLUENZA A-H1, INFLUENZA A-H1 PDM09, INFLUENZA A-H3, HUMANO, ENTEROVIRUS, VIRUS PARAINFLUENZA 1, VIRUS PARAINFLUENZA 2, VIRUS PARAINFLUENZA 3, VIRUS PARAINFLUENZA 4, METAPNEUMOVIRUS, BOCAVIRUS, RHINOVIRUS, CORONAVIRUS NL63, CORONAVIRUS N229E Y CORONAVIRUS OC43	EXUDADO/ HISOPADO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 3 ML DE ASPIRADO NASOFARINGEO /LAVADO BRONCOALVEOLAR O 1 ML DE MEDIO DE TRANSPORTE PBS ESTERIL O SECO. ENVIAR EXUDADO/ HISOPADO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS



ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-1128	ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 2 (BACTERIANO)	EXUDADO/ HISOPADO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 3 ML DE ASPIRADO NASOFARINGEO/ LAVADO BRONCOALVEOLAR, ESPUTO O 1 ML DE MEDIO TRANSPORTE PBS ESTERIL O SECO. ENVIAR EXUDADO/ HISOPADO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-1129	ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 3 (VIRAL/ BACTERIANO)	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO, HISOPADO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 3 ML DE ASPIRADO NASOFARINGEO, LAVADO BRONCOALVEOLAR O 300 uL DE MEDIO DE TRANSPORTE. ENVIAR HISOPADO NASOFARINGEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1130	ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 4	LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO, EXUDADO/ HISOPADO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 1 ML DE ASPIRADO NASOFARINGEO /LAVADO BRONCOALVEOLAR O MEDIO DE TRANSPORTE. ENVIAR EXUDADO/HISOPADO NASOFARINGEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS

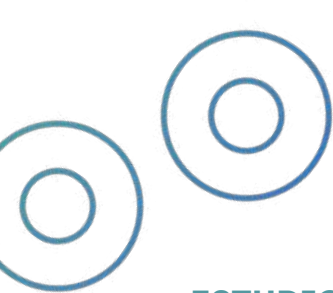

ESTUDIO

CONTENIDO

TIPO DE MUESTRA

CONDICIONES DE LA MUESTRA

PLAZO DE ENTREGA

LB-1131	ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR GARRAPATAS	BORRELIA BURGENDORFERI S.I./ BORRELIA MIYAMOTOI, ANAPLASMA PHAGOCITOPHYLUM, COXIELA BURNETTI, RICKETT-SIA SPP. BABESIA MICROTI/ BABESIA DIVERGENS, EHRLICHIA CHAFEENSIS/ EHRLICHIA MURIS Y VIRUS TICK BORNE ENCEPHALITIS (TBEV).	SANGRE TOTAL CON EDTA , SUERO, LIQUIDO O MATERIAL BIOLOGICO	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA AMBIENTE; TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 1 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION; CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR MUESTRA DE TEJIDO 0.5 G, CULTIVO MICROBIOLOGICO DE GARRAPATA, BIOPSIA CUTANEA TEJIDO FFPE. TEMPERATURA AMBIENTE O 1 ML DE LIQUIDO SINOVIAL 1 ML. TEMPERATIURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS
LB-1123	ENFERMEDADES TROPICALES	ZIKA, DENGUE Y CHIKUNGUNYA	SUERO, PLASMA CON EDTA U ORINA	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR SUERO 3 ML DE SUERO; TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3ML DE PLASMA CON EDTA O CONTENERDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE ORINA 20 ML. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-1171	K-RAS	DETECCION DE SIETE MUTACIONES SOMATICAS EN LOS CODONES 12 (12ALA, 12 ASP, 12ARG, 12CYS, 12SER, 12VAL) Y 13 (13ASP), EN EL ONCOGEN KRAS	TEJIDO	TUBO DE MICROCENTRIFUGA. ENVIAR CORTES DE TEJIDO FFPE (5um); 2 BLOQUE FFPE O 3 LAMINILLAS CON TEJIDO FIJADO SIN TEÑIR. TEMPERATURA AMBIENTE.	6 DIAS
LB-1172	MICRODELECCIONES EN EL CROMOSOMA Y	DETECCION DE 19 MICRODELECCIONES EN LAS REGIONES AZF _a , AZF _b , Y AZF _c EN EL CROMOSOMA Y	LIQUIDO SEMINAL O SANGRE TOTAL CON EDTA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 3 ML DE SEMEN O TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA AMBIENTE.	5 DIAS
LB-1173	MICROINESTABILIDAD SATELITAL (MSI)	DETECCION DE 5 MARCADORES DE REPETICION DE 1 NUCLEOTIDO (BAT-25, BAT-26, NR21, NR-24 Y MONO-27), Y 2 MARCADORES DE REPETICION DE 5 NUCLEOTIDOS (PENTA C AND PENTA D)	TEJIDO	TUBO DE MICROCENTRIFUGA. ENVIAR CORTES DE TEJIDO FFPE (5um); 1 BLOQUE FFPE O 5 LAMINILLAS CON TEJIDO FIJADO SIN TEÑIR. TEMPERATURA AMBIENTE.	6 DIAS





ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA	
LB-1174	MUTACIONES ASOCIADAS A ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES	SANGRE TOTAL CON EDTA O HISOPADO	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 3 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA O MEDIO DE TRANSPORTE STUART. ENVIAR HISOPADO BUCAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	6 DIAS	
LB-1180	QUANTIFERON RESPUESTA A PEPTIDOS ANTIGENICOS ASOCIADOS A MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS	ESAT-6, CFP-10	SANGRE TOTAL CON HEPARINA	TUBO QFT (TUBO NIL, TUBO TB ANTIGEN, TUBO MITOGEN). ENVIAR SANGRE TOTAL HEPARINIZADA. ENVIAR TUBOS TOTALMENTE LLENOS. TEMPERATURA AMBIENTE.	5 DIAS
LB-1176	PANEL CANCER DE PULMON	17 GENES OBJETIVO (ALK, BRAF, EGFR, HER2, FGFR 1, 2 Y 3, KRAS, MET, NRG1 NTRK1 1, 2 Y 3, NUTM1, PIK3CA, RET, ROS1	TEJIDO	TUBO DE MICROCENTRIFUGA. ENVIAR CORTES DE TEJIDO FFPE (5um); 1 BLOQUE FFPE O 5 LAMINILLAS CON TEJIDO FIJADO SIN TEÑIR. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-1133	PANEL DE CANDIDIASIS	CANDIDA ALBICANS, CANDIDA DUBLINIENSIS, CANDIDA TROPICALIS, CANDIDA PARAPSIOSIS, CANDIDA GLABRATA, CANDIDA KRUSEI	EXUDADO, HISOPADO, ORINA O LIQUIDO O MATERIAL BIOLÓGICO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR EXUDADO/ HISOPADO VAGINAL (O DE LA ZONA CON SOSPECHA DE INFECCION) EN 1 ML DE MEDIO DE TRANSPORTE (PBS, THINPREP®), O SECO: 20ML DE ORINA O 3ML DE CITOLOGIA EN BASE LIQUIDA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS


**ESTUDIO****CONTENIDO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-1134	PANEL DE SEPSIS	<p>ENTEROCOCCUS, LISTERIA MONOCYTOGENES, STAPHYLOCOCCUS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, STREPTOCOCCUS, STREPTOCOCCUS AGALACTIAE, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, STREPTOCOCCUS PYOGENES, ACINETOBACTER BAUMANNIL, HAEMOPHYLUS INFLUENZAE, NEISSERIA MENINGITIDIS, PSEUDOMONAS AEUROGINOSA, ENTEROBACTERIAEAE, COMPLEJO ENTEROBACTER CLOACAE, E. COLI, KLEBSIELLA OXYTOCA, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PROTEUS, SERRATIA MARCESCENS, CANDIDA ALBICANS, CANDIDA GLABRATA, CANDIDA KRUSEI, CANDIDA PARAPITOSIS, CANDIDA TROPICALIS, MECA: RESISTENCIA A METICILINA, VANA/B: RESISTENCIA A VANCOMICINA, KPC: RESISTENCIA A CARBAPENEMS.</p>	SANGRE TOTAL	MEDIO ESPECIAS. ENVIAR 1ML DE SANGRE TOTAL (HEMOCULTIVO POSITIVO). TEMPERATURA AMBIENTE.	2 DIAS
LB-1135	PANEL DE VAGINOSIS BACTERIANA	<p>GARDNERELLA VAGINALIS, ATOPOBLUM VAGINAE, BACTERIAS ASOCIADAS A VAGINOSIS BACTERIANA 2 (BVAB-2), MEGASPHAERA 1 Y MEGASPHAERA 2.</p>	EXUDADO/HISOPADO O CEPILLADO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR MEDIO DE TRANSPORTE (1 ML PBS, THINPREP) O SECO; EXUDADO/HISOPADO VAGINAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION O CITOLOGIA EN BASE LIQUIDA ENVIAR 3 ML. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-1136	PANEL GASTROINTESTINAL 1 (DETECCION Y DIFERENCIACION) DE TOXINA A Y B DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE)	TOXINA A DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE	HECES O AGUA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 3 ML DE HECES LIQUIDAS, SOLIDAS 1 G O 30 ML DE AGUA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS





ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-1137	PANEL GASTROINTESTINAL 2 (DIARREA)	HECES	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 3 ML DE HECES LIQUIDAS O SOLIDAS 1G. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-1138	PANEL GASTROINTESTINAL 3 (BACTERIAS, PARASITOS Y VIRUS)	HECES	MEDIO CARY BLAIR. ENVIAR 200 uL DE HECES. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1139	PANEL MENINGITIS/ ENCEFALITIS 3 (BACTERIAS, VIRUS Y LEVADURAS)	LIQUIDO O MATERIAL BIOLOGICO	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 1L DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

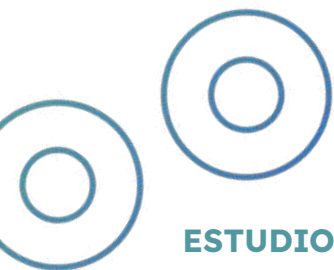

ESTUDIO


CONTENIDO

TIPO DE MUESTRA


CONDICIONES DE LA MUESTRA

PLAZO DE ENTREGA

LB-1177	PANEL REACTIVO DE ANTICUERPOS	CLASE I Y CLASE II	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 3 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-544	PANEL VIRAL DE HEPATITIS I	AC. ANTI HEPATITIS A TOTAL (HAV-T), AC. DE CENTRO DE HEPATITIS B (AHBC), AC. ANTI HEPATITIS C (AHCV)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-545	PANEL VIRAL DE HEPATITIS II	AC. ANTI HEPATITIS A TOTAL (HAV-T), AC. DE CENTRO DE HEPATITIS B (AHBC), AC. ANTI HEPATITIS C (AHCV), AC. ANTI HEPATITIS D (HDV), AC. ANTI HEPATITIS E (IgG)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-546	PANEL VIRAL DE HEPATITIS III	AC ANTI HEPATITIS A IgG (HAV-G), AC ANTI HEPATITIS A IgM (HAV-M), AC DE CENTRO DE HEPATITIS B CORE (αHBC), AC DE CENTRO DE HEPATITIS B CORE IgM (αHBC M), AC ANTI HEPATITIS C (αHCV), AC ANTI HEPATITIS D (HDV), AC ANTI HEPATITIS E (IgG)	EXUDADO/HISOPADO O CEPILLADO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-547	PERFIL ADOLESCENTE FEMENINO	ESTRADIOL, HORMONAS FOLICULO ESTIMULANTE (FSH), HORMONA LUTEINIZANTE (LH), PROLACTINA SERICA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-548	PERFIL ADOLESCENTE MASCULINO	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH), HORMONA LUTEINIZANTE (LH), TESTOSTERONA TOTAL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

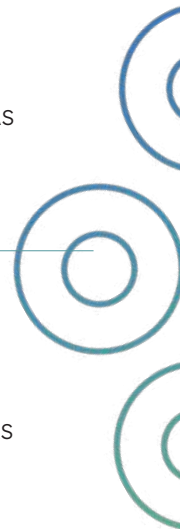

ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-549	PERFIL ANDROGENICO (HIRSUTISMO)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-550	PERFIL AUTOINMUNE I	SUERO Y PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2.0 ML DE SUERO Y TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 2.0 ML DE PLASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-551	PERFIL AUTOINMUNE II	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-552	PERFIL AUTOINMUNE III	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-553	PERFIL CARDIACO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-554	PERFIL CATECOLAMINAS EN ORINA DE 24 H	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-555	PERFIL CATECOLAMINAS EN PLASMA	PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS

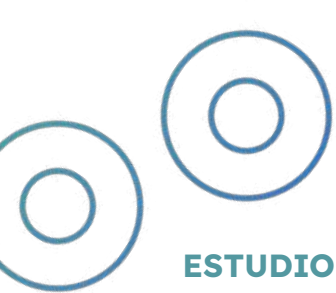

ESTUDIO

CONTENIDO


TIPO DE MUESTRA

CONDICIONES DE LA MUESTRA

PLAZO DE ENTREGA

LB-556	PERFIL CLIMATERIO	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH), HORMONA LUTEINIZANTE (LH), ESTRADIOL (E2)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-557	PERFIL DE ALCOHOLISMO	ALCOHOL, BILIRRUBINA CONJUGADA, BILIRRUBINA NO CONJUGADA, BILIRRUBINA TOTAL, COLESTEROL, FOSFATASA ALCALINA, GAMMA GLUTAMILTRANSFERASA, ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT/TGP), TRIGLICERIDOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-558	PERFIL DE ALERGENOS 6 DETERMINACIONES (ALIMENTICIOS)	6 ALERGENOS ALIMENTICIOS INDIVIDUALES	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-559	PERFIL DE ALERGENOS 6 DETERMINACIONES (INHALATORIOS)	6 ALERGENOS INHALATORIOS INDIVIDUALES	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-648	PERFIL DE ALERGENOS ALIMENTICIOS (37)	ALERGENO ALUBIA (FRIJOL BLANCO), ALERGENO MEZCLA COL, COLIFLOR Y BROCOLI, ALERGENO ZANAHORIA, ALERGENO CHICHARO, ALERGENO PIMIENTO VERDE, ALERGENOCALABAZA, ALERGENO JITOMATE, ALERGENO ALMENDRA, ALERGENO CACAHUATE, ALERGENO NUEZ, ALERGENO AGUACATE, ALERGENO MANZANA, ALERGENO PLATANO, ALERGENO MEZCLA DE CITRICOS (LIMON, LIMA, NARANJA), ALERGENO DURAZNO, ALERGENO FRESA, ALERGENO CHOCOLATE, ALERGENO LEVADURA, ALERGENO AVENA, ALERGENO TRIGO, ALERGENO MAIZ CULTIVADO, ALERGENO PAPA, ALERGENO ARROZ,	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 3 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS



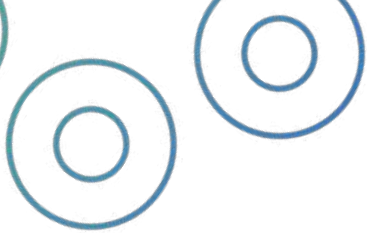

ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-648	PERFIL DE ALERGENOS ALIMENTICIOS (37)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 3 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 dias
LB-708	PERFIL DE ALERGENOS DE 12 DETERMINACIONES	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 3 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-647	PERFIL DE ALERGENOS INHALATORIO (37)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 3 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS




ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA	
LB-560	PERFIL DE ALERGENOS LECHE DE VACA	AC ANTI PROTEINA DE LECHE DE VACA (IgG), AC ANTI PROTEINA DE LECHE DE SOYA (IGG), INMUNOGLOBULINA E	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-561	PERFIL DE ALERGENOS MASTER	32 ALERGENOS INDIVIDUALES	SUERO Y PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 3 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-562	PERFIL DE AMENORREA	ESTRADIOL (E2), HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH), HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH), HORMONA LUTEINIZANTE (LH), INDICE DE TIROXINA LIBRE (ITL), PROLACTINA SERICA, TRIYODOTIRONINA (T3) TOTAL, TIROXINA (T4) TOTAL.	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-563	PERFIL DE ANEMIAS I	BIOMETRIA HEMATICA, HIERRO, % DE SATURACION DE HIERRO, CAPACIDAD DE UNION DE HIERRO TOTAL, ACIDO FOLICO (FOLATOS), FERRITINA, TRANSFERRINA	SANGRE TOTAL CON EDTA Y SUERO	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5.0 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA Y TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-564	PERFIL DE ANEMIAS II	VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA), ACIDO FOLICO (FOLATOS), HIERRO, FERRITINA, TRANSFERRINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-565	PERFIL DE ANTICUERPOS EXTRAIBLES DEL NUCLEO	AC SSA (RO), AC SSB (LA), AC ANTI SMITH (SM), AC ANTI RIBONUCLEOPROTEINA (RNP), AC ANTI SCL-70 (ANTI-ESCLERODERMIA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-566	PERFIL DE ARTRITIS	FACTOR REUMATOIDE (FR LATEX), PROTEINA C REACTIVA, ACIDO URICO, AC ANTI NUCLEARES	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA	
LB-567	PERFIL DE DROGAS DE ABUSO I	COCAINA, CANNABINOIDES (MARIHUANA)	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-568	PERFIL DE DROGAS DE ABUSO II	COCAINA, CANNABINOIDES (MARIHUANA), ANFETAMINAS	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-569	PERFIL DE DROGAS DE ABUSO III	COCAINA, CANNABINOIDES (MARIHUANA), ANFETAMINAS BENZODIACEPINAS, OPIACEOS, BARBITURICOS	ORINA	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-570	PERFIL DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA	HEMOGLOBINA GLUCOSILADA A1c, HB TOTAL, HEMOGLOBINA A1c, GLUCOSA PROMEDIO TRIMESTRAL (GPT)	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-571	PERFIL DE HEPATITIS A Y B	AC ANTI HEPATITIS A IgG (HAV-G), AC ANTI HEPATITIS A IgM (HAV-M), AC DE CENTRO DE HEPATITIS B CORE (AHBC), AC DE CENTRO DE HEPATITIS B CORE IgM (AHBC M), AC ANTI AG "E" DE HEPATITIS B (AHBE)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-572	PERFIL DE HEPATITIS A, B Y C	AC ANTI HEPATITIS A IgG (HAV-G), AC ANTI HEPATITIS A IgM (HAV-M), AC DE CENTRO DE HEPATITIS B (AHBC), AC DE CENTRO DE HEPATITIS B (AHBC M), AG E DE HEPATITIS B (HBEAG), AC ANTI AG E DE HEPATITIS B (AHBE), AG S DE HEPATITIS B (HBSAG), AC ANTI HEPATITIS C (AHCV), AC ANTI AG S DE HEPATITIS B (AHBS)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

**ESTUDIO****CONTENIDO****TIPO DE MUESTRA****CONDICIONES DE LA MUESTRA****PLAZO DE ENTREGA**

LB-573	PERFIL DE HEPATITIS A, B, C Y D	AC ANTI HEPATITIS A IgG (HAV-G), AC ANTI HEPATITIS A IgM (HAV-M), AC ANTI AG S DE HEPATITIS B (AHBS), AG S DE HEPATITIS B (HBSAG), AC ANTI AG E DE HEPATITIS B (AHBE), AG E DE HEPATITIS B (HBEAG), AC DE CENTRO DE HEPATITIS B CORE (AHBC), AC DE CENTRO DE HEPATITIS B CORE IGM (AHBC M), AC ANTI HEPATITIS C (AHCV), AC ANTI HEPATITIS D (HDV)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-574	PERFIL DE HEPATITIS B FASE CRONICA	AC DE CENTRO DE HEPATITIS B CORE (AHBC), AC DE CENTRO DE HEPATITIS B CORE IGM (AHBC M), AC ANTI AG E DE HEPATITIS B (AHBE), AG S DE HEPATITIS B (HBSAG), AC ANTI AG S DE HEPATITIS B (AHBS)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-575	PERFIL DE HEPATITIS B INFECCION ACTIVA (RECIENTE)	AC DE CENTRO DE HEPATITIS B CORE IGM (AHBC M), AC ANTI AG E DE HEPATITIS B (AHBE), AC ANTI AG S DE HEPATITIS B (AHBS)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-636	PERFIL DE HIERRO/ CINETICA DE HIERRO	HIERRO, % DE SATURACION DE HIERRO, CAPACIDAD DE UNION DE HIERRO TOTAL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-576	PERFIL DE HIPERTENSION	ALDOSTERONA SERICA, CATECOLAMINAS TOTALES EN ORINA, CORTISOL EN SUERO, RENINA, LIPIDOS TOTALES, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS, COLESTEROLES HDL, LDL, VLDL	SUERO, PLAMA CON EDTA Y ALICUOTA DE 20 ML DE ORINA DE 24 H	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2.0 ML DE PLASMA CON EDTA; TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2.0 ML DE SUERO Y CONTENEDOR DE PLASTICO, LIMPIO Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA DE 24 H. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-577	PERFIL DE INMUNOGLOBULINAS II	INMUNOGLOBULINA A, INMUNOGLOBULINA D, INMUNOGLOBULINA E, INMUNOGLOBULINA G, INMUNOGLOBULINA M	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

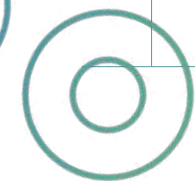

ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA	
LB-578	PERFIL DE LIPIDOS I	LIPIDOS TOTALES, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS, COLESTEROLES HDL, LDL, VLDL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-579	PERFIL DE LIPIDOS II	LIPIDOS TOTALES, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS, COLESTEROLES HDL, LDL, VLDL, ELECTROFORESIS DE LIPOPROTEINAS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS
LB-580	PERFIL DE LIPIDOS III	LIPIDOS TOTALES, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS, COLESTEROLES HDL, LDL, VLDL, ELECTROFORESIS DE LIPOPROTEINAS, COLESTEROL LIBRE, COLESTEROL ESTERIFICADO, % COLESTEROL ESTERIFICADO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	6 DIAS
LB-581	PERFIL DE LUPUS	AC ANTI NUCLEARES, COMPLEMENTO C3, COMPLEMENTO C4, COMPLEMENTO HEMOLITICO 50 (CH50), CELULAS L-E (LUPUS ERITEMATOSO), T3 UPTAKE	SUERO Y SANGRE TOTAL	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2.0 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION Y TUBO TAPON ROJO. ENVIAR SANGRE TOTAL SIN CENTRIFUGAR. TEMPERATURA AMBIENTE.	2 DIAS
LB-637	PERFIL DE METANEFRINAS EN PLASMA	METANEFRINAS EN PLASMA, NORMETANEFRINAS EN PLASMA, METANEFRINAS TOTALES EN PLASMA	PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-582	PERFIL DE METANEFRINAS ORINA	METANEFRINAS TOTALES EN ORINA, METANEFRINAS EN ORINA, NORMETANEFRINAS EN ORINA	ALICUOTA DE ORINA 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-583	PERFIL DE OSTEOPOROSIS I	CALCIO, CALCIO EN ORINA DE 24 H, DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 H, FOSFATASA ALCALINA, OSTEOCALCINA, PYRILINKS-D (DEOXIPIRINOLINA)	SUERO Y ALICUOTA DE ORINA DE 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL Y TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2.0 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS




ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-584	PERFIL DE OSTEOPOROSIS II	SUERO Y ALICUOTA DE ORINA DE 24 H	CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR ALICUOTA DE 20 ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL Y TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 20 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	3 DIAS
LB-585	PERFIL DIABETICO I	SUERO Y SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2.0 DE SUERO Y TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5.0 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-586	PERFIL DIABETICO II	SUERO, SANGRE TOTAL CON EDTA Y ORINA	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2.0 ML DE SUERO; TUBO TAPO LILA, ENVIAR 5.0 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA Y CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-587	PERFIL GINECOLOGICO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-588	PERFIL HIPOFISIARIO	SUERO Y PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2.0 ML DE SUERO Y TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2.0 ML DE PLASMA CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

	ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-589	PERFIL HORMONAL FEMENINO I	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH), HORMONA LUTEINIZANTE (LH), PROLACTINA SERICA, TESTOSTERONA TOTAL, PROGESTERONA SERICA, ESTRADIOL (E2), CORTISOL EN SUERO, HORMONA DE CRECIMIENTO BASAL, HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-590	PERFIL HORMONAL FEMENINO II	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH), HORMONA LUTEINIZANTE (LH), PROLACTINA SERICA, TESTOSTERONA TOTAL, PROGESTERONA SERICA, ESTRADIOL (E2), CORTISOL EN SUERO, HORMONA DE CRECIMIENTO BASAL, T3 UPTAKE, TRIYODOTIRONINA (T3) TOTAL, INDICE DE TIROXINA LIBRE (ITL), TIROXINA (T4) TOTAL, TIROXINA (T4) TOTAL, YODO PROTEICO, HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-591	PERFIL HORMONAL MASCULINO I	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH), HORMONA LUTEINIZANTE (LH), PROLACTINA SERICA, TESTOSTERONA TOTAL, PROGESTERONA SERICA, ESTRADIOL (E2), CORTISOL EN SUERO, HORMONA DE CRECIMIENTO BASAL, HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-592	PERFIL HORMONAL MASCULINO II	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH), HORMONA LUTEINIZANTE (LH), PROLACTINA SERICA, TESTOSTERONA TOTAL, PROGESTERONA SERICA, CORTISOL EN SUERO, HORMONA DE CRECIMIENTO BASAL, T3 UPTAKE, TRIYODOTIRONINA (T3) TOTAL, INDICE DE TIROXINA LIBRE (ITL), TIROXINA (T4) TOTAL, YODO PROTEICO (IP), HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-593	PERFIL INFECCIOSO POR PCR	CEPILLADO	MEDIO DE TRANSPORTE ESPECIAL. ENVIAR SECRECIÓN URETRAL/CERVICO-VAGINAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	8 DIAS
LB-543	PERFIL INMUNOGLOBULINA I	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN.	2 DIAS
LB-594	PERFIL MARCADORES TUMORALES BÁSICO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN.	2 DIAS
LB-595	PERFIL MARCADORES TUMORALES DE COLON/RECTO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN.	2 DIAS
LB-596	PERFIL MARCADORES TUMORALES DE ESTÓMAGO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN.	2 DIAS
LB-597	PERFIL MARCADORES TUMORALES DE HIGADO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN.	2 DIAS
LB-598	PERFIL MARCADORES TUMORALES DE MAMA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN.	2 DIAS

ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA	
LB-599	PERFIL MARCADORES TUMORALES DE MIELOMA/LINFOMA	BETA-2 MICROGLOBULINA SERICA, ALFAFETOPROTEINA (AFP), AG CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-600	PERFIL MARCADORES TUMORALES DE OVARIO	CA 125 (OVARIO), CA 72-4 (ESTOMAGO), AG CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-601	PERFIL MARCADORES TUMORALES DE PANCREAS	CA 19-9 (PANCREAS-COLON), AG CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-602	PERFIL MARCADORES TUMORALES DE PROSTATA	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL), ANTIGENO PROSTATICO FRACCION LIBRE (PSA LIBRE), FOSFATASA ACIDA, FRACCION PROSTATICA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-603	PERFIL MARCADORES TUMORALES DE TESTICULO	FRACCION BETA DE HGC SERICA (CUANTITATIVA), ALFAFETOPROTEINA (AFP), B-HGC LIBRE	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-604	PERFIL MARCADORES TUMORALES DE TIROIDES	TIROGLOBULINA, AG CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1087	PERFIL METABOLICO	GLUCOSA, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

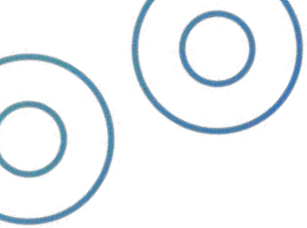

	ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-638	PERFIL NEONATAL ELISA (TAMIZ METABOLICO ELISA)	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES NEONATAL, TIROXINA (T4)NEONATAL, 17 ALFAHIDROXIPROGESTERONA NEONATAL, FENILALANINA NEONATAL, INMUNOTRIPSINA REACTIVA, 17 AMINOACIDOS POR CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA	SANGRE EN PAPEL FILTRO	TARJETA GUTHRIE. ENVIAR 5 CIRCULOS DE SANGRE TOTAL. TEMPERATURA AMBIENTE	4 DIAS
LB-639	PERFIL NEONATAL I (TAMIZ METABOLICO I)	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES NEONATAL, TIROXINA (T4) NEONATAL, 17 ALFAHIDROXIPROGESTERONA NEONATAL	SANGRE EN PAPEL FILTRO	TARJETA GUTHRIE. ENVIAR 5 CIRCULOS DE SANGRE TOTAL. TEMPERATURA AMBIENTE	4 DIAS
LB-640	PERFIL NEONATAL II (TAMIZ METABOLICO II)	HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES NEONATAL, 17 AMINOACIDOS POR CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA	SANGRE EN PAPEL FILTRO	TARJETA GUTHRIE. ENVIAR 5 CIRCULOS DE SANGRE TOTAL. TEMPERATURA AMBIENTE	4 DIAS
LB-641	PERFIL NEONATAL III (TAMIZ METABOLICO III)	HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES NEONATAL, TIROXINA (T4)NEONATAL, 17 AMINOACIDOS POR CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA	SANGRE EN PAPEL FILTRO	TARJETA GUTHRIE. ENVIAR 5 CIRCULOS DE SANGRE TOTAL. TEMPERATURA AMBIENTE	4 DIAS
LB-642	PERFIL NEONATAL IV (TAMIZ METABOLICO IV)	HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES NEONATAL, TIROXINA (T4) NEONATAL, 17 ALFAHIDROXIPROGESTERONA NEONATAL, 17 AMINOACIDOS POR CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA	SANGRE EN PAPEL FILTRO	TARJETA GUTHRIE. ENVIAR 5 CIRCULOS DE SANGRE TOTAL. TEMPERATURA AMBIENTE	4 DIAS
LB-643	PERFIL NEONATAL V (TAMIZ METABOLICO V)	HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES NEONATAL, TIROXINA (T4) NEONATAL, GALACTOSA TOTAL, 17 AMINOACIDOS POR CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA	SANGRE EN PAPEL FILTRO	TARJETA GUTHRIE. ENVIAR 5 CIRCULOS DE SANGRE TOTAL. TEMPERATURA AMBIENTE	4 DIAS



ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA	
LB-644	PERFIL NEONATAL VI (TAMIZ METABOLICO VI)	HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES NEONATAL, TIROXINA (T4) NEONATAL, 17 ALFAHIDROXIPROGESTERONA NEONATAL, GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA (NEONATAL), GALACTOSA TOTAL, INMUNOTRIPSINA REACTIVA, BIOTINIDASA, 17 AMINOACIDOS POR CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA	SANGRE EN PAPEL FILTRO	TARJETA GUTHRIE. ENVIAR 5 CIRCULOS DE SANGRE TOTAL. TEMPERATURA AMBIENTE	4 DIAS
LB-605	PERFIL OVARICO	HORMONA LUTEINIZANTE (LH), PROLACTINA SERICA, ESTRADIOL (E2)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-607	PERFIL PARATIROIDEO	CALCIO, CALCITONINA, FOSFORO, HORMONA PARATIROIDEA (PARATHORMONA /PTH-INTACTA)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-608	PERFIL PRENATAL I	GLUCOSA, UREA, CREATININA, BIOMETRIA HEMATICA, EXAMEN GENERAL DE ORINA, V.D.R.L. (REACCIONES SEROLUETICAS), GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	SUERO, SANGRE TOTAL CON EDTA Y ORINA	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO; TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA; CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-609	PERFIL PRENATAL II	GLUCOSA, UREA, CREATININA, BIOMETRIA HEMATICA, AC ANTI TOXOPLASMA GONDII (IGG), AC ANTI RUBEOLA (IGG), EXAMEN GENERAL DE ORINA, V.D.R.L. (REACCIONES SEROLUETICAS), GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	SUERO, SANGRE TOTAL CON EDTA Y ORINA	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO; TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA; CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA	
LB-610	PERFIL PREOPERATORIO	BIOMETRIA HEMATICA, EXAMEN GENERAL DE ORINA, TIEMPO DE PROTROMBINA (TP), TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADO (TTPA), GLUCOSA, UREA, CREATININA, GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	SUERO, SANGRE TOTAL CON EDTA, ORINA Y PLASMA CON CITRATO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO; TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA; CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL Y TUBO TAPON AZUL. ENVIAR 2 ML DE PASMA CON CITRATO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-611	PERFIL PROSTATICO I	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL), FOSFATASA ACIDA TOTAL, FOSFATASA ACIDA FRACCION PROSTATICA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-612	PERFIL PROSTATICO II	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL), ANTIGENO PROSTATICO FRACCION LIBRE (PSA LIBRE), FOSFATASA ACIDA TOTAL, FOSFATASA ACIDA FRACCION PROSTATICA, FOSFATASA ALCALINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-613	PERFIL RENAL I	UREA, CREATININA, DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 H, EXAMEN GENERAL DE ORINA, CULTIVO DE ORINA (UROCULTIVO)	SUERO, SANGRE TOTAL CON EDTA Y ORINA	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO; TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA; CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-614	PERFIL RENAL II	UREA, CREATININA, DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 H, EXAMEN GENERAL DE ORINA, PROTEINAS TOTALES CON RELACION A/G	SUERO, ORINA Y ALICUOTA DE ORINA DE 24 H	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO; CONTENEDOR DE PLASTICO, ESTERIL Y CON TAPA DE ROSCA. ENVIAR 20 ML DE ORINA OCASIONAL Y 20 ML DE ALICUOTA DE ORINA DE 24 HORAS ML INDICANDO EL VOLUMEN TOTAL. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-615	PERFIL REUMATICO	SUERO Y EXUDADO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION Y MEDIO DE TRANSPORTE AMIES. ENVIAR EXUDADO FARINGEO. TEMPERATURA AMBIENTE.	4 DIAS
LB-616	PERFIL SUPRARRENAL	SUERO Y PLASMA CON EDTA	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO Y TUBO TAPON LILA. ENVIAR 2 ML DE PLASMA CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-617	PERFIL TESTICULAR	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-618	PERFIL TIROIDEO BASICO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-619	PERFIL TIROIDEO I	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-620	PERFIL TIROIDEO II	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-621	PERFIL TIROIDEO III UPTAKE, TRIYODOTIRONINA (T3) TOTAL, TIROXINA (T4) TOTAL, YODO PROTEICO (IP), HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH), AC ANTI PEROXIDASA TIROIDEA (A-TPO), AC ANTI TIROGLOBULINA (A-TG), TIROGLOBULINA	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1085	PERFIL TIROIDEO IV "TRIYODOTIRONINA (T3) TOTAL TIROXINA (T4) TOTAL HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH) TRIYODOTIRONINA (T3) LIBRE TIROXINA (T4) LIBRE"	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-1084	PERFIL TIROIDEO V "TRIYODOTIRONINA (T3) TOTAL TIROXINA (T4) TOTAL HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH) TRIYODOTIRONINA (T3) LIBRE TIROXINA (T4) LIBRE T3 UPTAKE INDICE DE TIROXINA LIBRE (ITL) YODO PROTEICO (IP)"	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-622	PERFIL TORCH I (IgG) AC ANTI TOXOPLASMA GONDII (IgG), AC ANTI RUBEOLA (IgG), AC ANTI CITOMEGALOVIRUS (IGG), AC ANTI HERPES I (IgG), AC ANTI HERPES II (IgG)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-623	PERFIL TORCH II (IgM) AC ANTI TOXOPLASMA GONDII (IgM), AC ANTI RUBEOLA (IgM), AC ANTI CITOMEGALOVIRUS (IgM), AC ANTI HERPES I (IgM), AC ANTI HERPES II (IgM)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-624	PERFIL TORCH III (IgG E IgM) AC ANTI TOXOPLASMA GONDII (IgG), AC ANTI TOXOPLASMA GONDII (IgM), AC ANTI RUBEOLA (IgG), AC ANTI RUBEOLA (IgM), AC ANTI CITOMEGALOVIRUS (IgG), AC ANTI CITOMEGALOVIRUS (IgM), AC ANTI HERPES I (IgG), AC ANTI HERPES I (IgM), AC ANTI HERPES II (IgG), AC ANTI HERPES II (IgM)	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS


	ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-978	PRUEBAS DE FUNCION HEPATICA (PFH)	BILIRRUBINA TOTAL, BILIRRUBINA CONJUGADA, BILIRRUBINA NO CONJUGADA, ALBUMINA, GLOBULINA, RELACION A/G, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA, ALANINA AMINOTRANSFERASA, PROTEINAS TOTALES, FOSFATASA ALCALINA.	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-625	QUIMICA SANGUINEA DE 12 ELEMENTOS	GLUCOSA, UREA, CREATININA, ACIDO URICO, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST/TGO), ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT/TGP), FOSFATASA ALCALINA, BILIRRUBINA TOTAL, BILIRRUBINA CONJUGADA, BILIRRUBINA NO CONJUGADA, PROTEINAS TOTALES, ALBUMINA, GLOBULINA, RELACION ALBUMINA/GLOBULINA.	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-626	QUIMICA SANGUINEA DE 18 ELEMENTOS	GLUCOSA, UREA, NITROGENO UREICO (BUN), CREATININA, ACIDO URICO, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST/TGO), ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT/TGP), FOSFATASA ALCALINA, LACTATO DESHIDROGENASA, BILIRRUBINA TOTAL, BILIRRUBINA CONJUGADA, BILIRRUBINA NO CONJUGADA, PROTEINAS TOTALES, ALBUMINA, GLOBULINA, RELACION A/G CALCIO, POTASIO, CLORO	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-627	QUIMICA SANGUINEA DE 24 ELEMENTOS	GLUCOSA, UREA, CREATININA, ACIDO URICO, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST/TGO), ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT/TGP), BILIRRUBINA TOTAL, BILIRRUBINA CONJUGADA, BILIRRUBINA NO CONJUGADA, FOSFATASA ALCALINA, PROTEINAS TOTALES, ALBUMINA, GLOBULINA, REACCION ALBUMINA/GLOBULINA, LACTATO DESHIDROGENASA, GAMMA GLUTAMILTRANSFERASA, SODIO, POTASIO, CLORO, CALCIO, FOSFORO, HIERRO, COLESTEROL HDL	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS




ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-628	QUIMICA SANGUINEA DE 27 ELEMENTOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-629	QUIMICA SANGUINEA DE 28 ELEMENTOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-630	QUIMICA SANGUINEA DE 3 ELEMENTOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-631	QUIMICA SANGUINEA DE 33 ELEMENTOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS



ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-631	QUIMICA SANGUINEA DE 33 ELEMENTOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-632	QUIMICA SANGUINEA DE 38 ELEMENTOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-633	QUIMICA SANGUINEA DE 4 ELEMENTOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-634	QUIMICA SANGUINEA DE 5 ELEMENTOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS

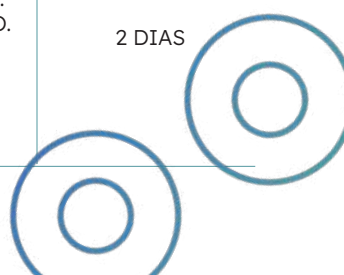

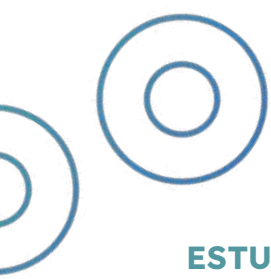

	ESTUDIO	CONTENIDO	TIPO DE MUESTRA	CONDICIONES DE LA MUESTRA	PLAZO DE ENTREGA
LB-635	QUIMICA SANGUINEA DE 6 ELEMENTOS	GLUCOSA, UREA, CREATININA, ACIDO URICO, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS	SUERO	TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	2 DIAS
LB-492	SUBPOBLACION DE LINFOCITOS	CD3,CD16,CD56,CD45,CD19,CD8	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS
LB-491	SUBPOBLACION DE LINFOCITOS T	CD45, CD3, CD4, CD8	SANGRE TOTAL CON EDTA	TUBO TAPON LILA. ENVIAR 5 ML DE SANGRE TOTAL CON EDTA. TEMPERATURA DE REFRIGERACION.	4 DIAS



A close-up photograph of a laboratory setting. A person wearing a white lab coat and blue nitrile gloves is holding a black rack containing several test tubes. The test tubes are filled with a yellowish-orange liquid. The background is a blurred laboratory environment with a light blue wall and a metal railing.

CATÁLOGO DE **ALERGENOS**


PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS

TIPO DE MUESTRA: SUERO

CONDICIONES DE LA MUESTRA: TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO.
TEMPERATURA DE REFRIGERACION

A

CÓDIGO	ESTUDIO	CÓDIGO	ESTUDIO
LB-646	ALERGENO ACACIA	LB-673	ALERGENO ARBOL DE ALGODON
LB-649	ALERGENO ACARUS SIRO	LB-674	ALERGENO ARROZ
LB-650	ALERGENO AGROSTIS ALBA	LB-675	ALERGENO ARTEMISA
LB-651	ALERGENO AGUACATE	LB-676	ALERGENO ASCARIS
LB-652	ALERGENO AJO	LB-677	ALERGENO ASPERGILLUS
LB-653	ALERGENO AJONJOLI	LB-678	ALERGENO ASPERGILLUS CLAVATUS
LB-654	ALERGENO ALAMO	LB-679	ALERGENO ASPERGILLUS FLAVUS
LB-655	ALERGENO ALBAHACA	LB-680	ALERGENO ASPERGILLUS FUMIGATUS
LB-656	ALERGENO ALFA LACTOALBUMINA	LB-681	ALERGENO ASPERGILLUS NIDULANS
LB-657	ALERGENO ALGODON	LB-682	ALERGENO ASPERGILLUS ORYZAE
LB-658	ALERGENO ALMEJA	LB-683	ALERGENO ASPERGILLUS TERRENS
LB-659	ALERGENO ALMENDRA	LB-684	ALERGENO ATRIFLEX CONFERTIFOLIA
LB-660	ALERGENO ALPISTE	LB-685	ALERGENO ATRIPLEX CANESCENS
LB-661	ALERGENO ALTERNARIA	LB-686	ALERGENO ATUN
LB-662	ALERGENO ALTERNARIA TENIUS	LB-687	ALERGENO AVELLANA
LB-663	ALERGENO ALUBIA (FRIJOL BLANCO)	LB-688	ALERGENO AVENA
LB-664	ALERGENO AMARANTHUS HYBRIDUS	LB-689	ALERGENO AVISPA AMARILLA
LB-665	ALERGENO AMARANTO	LB-690	ALERGENO AVISPA CARA BLANCA
LB-666	ALERGENO AMBROSIA	LB-691	ALERGENO AVISPA EUROPEA
LB-667	ALERGENO AMOXICILINA	LB-692	ALERGENO AVISPA PAPELERA
LB-668	ALERGENO AMPICILINA	LB-693	ALERGENO AVISPON
LB-669	ALERGENO ANIS		
LB-670	ALERGENO ANISAKIS		
LB-671	ALERGENO APIO		
LB-672	ALERGENO ARANDANO		

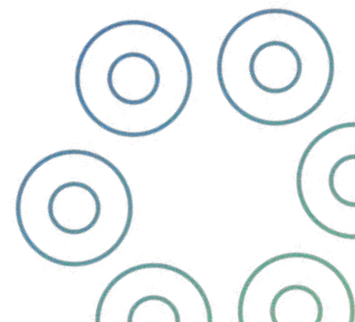

PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS

TIPO DE MUESTRA: SUERO

CONDICIONES DE LA MUESTRA: TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO.
TEMPERATURA DE REFRIGERACION

B

CÓDIGO	ESTUDIO	CÓDIGO	ESTUDIO
LB-694	ALERGENO BACALAO	LB-718	ALERGENO CEBADA
LB-695	ALERGENO BERENJENA	LB-719	ALERGENO CEBOLLA
LB-696	ALERGENO BETA LACTOGLOBULINA	LB-720	ALERGENO CECINA
LB-697	ALERGENO BROCOLI	LB-721	ALERGENO CEDRO
LB-698	ALERGENO BLOMIA TROPICALIS	LB-722	ALERGENO CEDRO DE LA MONTAÑA
LB-699	ALERGENO BROMO	LB-723	ALERGENO CELULOSA

C

LB-700	ALERGENO CACAHUATE	LB-726	ALERGENO CEPHALOSPORIUM MACREMONIUM
LB-701	ALERGENO CACAO	LB-727	ALERGENO CEREZA
LB-702	ALERGENO CAFE	LB-728	ALERGENO CHAETOMUM GLOBOSUM
LB-703	ALERGENO CALABAZA	LB-729	ALERGENO CHAMPIÑON
LB-704	ALERGENO CAMARON	LB-730	ALERGENO CHAYOTE
LB-705	ALERGENO CANDIDA ALBICANS	LB-731	ALERGENO CHICHARO
LB-706	ALERGENO CANGREJO	LB-732	ALERGENO CHINCHE
LB-707	ALERGENO CAÑA DE AZUCAR	LB-733	ALERGENO CHOCOLATE
LB-709	ALERGENO CARNE DE CARNERO (CORDERO)	LB-734	ALERGENO CIRUELA
LB-710	ALERGENO CARNE DE CERDO	LB-735	ALERGENO CLADOSPORIUM HERBARUM
LB-711	ALERGENO CARNE DE PAVO	LB-736	ALERGENO CLARA DE HUEVO
LB-712	ALERGENO CARNE DE POLLO	LB-737	ALERGENO COCO
LB-713	ALERGENO CARNE DE RES	LB-738	ALERGENO COL
LB-714	ALERGENO CASEINA	LB-739	ALERGENO COLIFLOR
LB-715	ALERGENO CASPA DE CABALLO	LB-740	ALERGENO CUCARACHA ALEMANA
LB-716	ALERGENO CASPA DE PERRO	LB-741	ALERGENO CUCARACHA AMERICANA
LB-717	ALERGENO CASPA DE VACA	LB-742	ALERGENO CURULARIA LUNATA

PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS

TIPO DE MUESTRA: SUERO

CONDICIONES DE LA MUESTRA: TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO.
TEMPERATURA DE REFRIGERACION

D

CÓDIGO

ESTUDIO

LB-803	ALERGENO DE LECHE DE VACA
LB-804	ALERGENO DE LECHE HERVIDA
LB-744	ALERGENO DE TE
LB-745	ALERGENO DERMATOPHAGOIDES FARINAE (ACARO)
LB-746	ALERGENO DERMATOPHAGOIDES MICROCERAS
LB-747	ALERGENO DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS
LB-748	ALERGENO DIENTE DE LEON
LB-749	ALERGENO DURAZNO

E

LB-750	ALERGENO EJOTE
LB-751	ALERGENO ENCINO
LB-752	ALERGENO ENTEROTOXINA A
LB-753	ALERGENO EPAZOTE
LB-754	ALERGENO EPICOCUM
LB-755	ALERGENO EPITELIO CABRA
LB-756	ALERGENO EPITELIO CERDO
LB-757	ALERGENO EPITELIO COBAYO
LB-758	ALERGENO EPITELIO CONEJO
LB-759	ALERGENO EPITELIO DE GATO
LB-760	ALERGENO EPITELIO DE OVEJA
LB-761	ALERGENO EPITELIO DE RATA
LB-762	ALERGENO EPITELIO DE RATON

CÓDIGO

ESTUDIO

LB-763	ALERGENO EPITELIO HAMSTER
LB-764	ALERGENO EPITELIO PERRO
LB-765	ALERGENO ESPICOCUM PURPURASENS
LB-766	ALERGENO ESPINACA
LB-767	ALERGENO ESPORAS
LB-768	ALERGENO EUCALIPTO
LB-769	ALERGENO EXCREMENTO DE PALOMA

F

LB-770	ALERGENO FRANSERIA ACATHICARPA
LB-771	ALERGENO FRESA
LB-772	ALERGENO FRESNO (FRAXINUS SP.)
LB-773	ALERGENO FRESNO BLANCO
LB-774	ALERGENO FRIJOL DE SOYA
LB-775	ALERGENO FRIJOL PINTO
LB-776	ALERGENO FRIJOL ROJO
LB-777	ALERGENO FUSARIUM UNIFORME

G

LB-778	ALERGENO GARBANZO
LB-779	ALERGENO GATO
LB-780	ALERGENO GIRASOL
LB-781	ALERGENO GLUTEN
LB-782	ALERGENO CUCARACHA AMERICANA

PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS

TIPO DE MUESTRA: SUERO

CONDICIONES DE LA MUESTRA: TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO.
TEMPERATURA DE REFRIGERACION

H

CÓDIGO

ESTUDIO

LB-783	ALERGENO HELMINTHOSPORIUM SP.
LB-784	ALERGENO HIERBA COLA DE CORDERO
LB-785	ALERGENO HIERBA COMUN
LB-786	ALERGENO HIERBA FALSA
LB-787	ALERGENO HIERBA TIMOTEA
LB-788	ALERGENO HIERBATREPADORA
LB-789	ALERGENO HIGO
LB-790	ALERGENO HORMIGA ROJA
LB-791	ALERGENO HUACHINANGO
LB-792	ALERGENO HUEVO

I

LB-793	ALERGENO ISOCIANATO HDI
--------	-------------------------

J

LB-794	ALERGENO JAMON
LB-795	ALERGENO JENGIBRE
LB-796	ALERGENO JITOMATE

K

LB-797	ALERGENO KIWI
--------	---------------

L

LB-798	ALERGENO LANA
LB-799	ALERGENO LANGOSTA

CÓDIGO

ESTUDIO

LB-800	ALERGENO LATEX
LB-801	ALERGENO LECHE DE CABRA
LB-802	ALERGENO LECHE DE SOYA
LB-805	ALERGENO LECHUGA
LB-806	ALERGENO LENGUA DE VACA
LB-807	ALERGENO LENTEJA
LB-808	ALERGENO LEVADURA
LB-809	ALERGENO LEVADURA DE CERVEZA
LB-810	ALERGENO LIMON

M

LB-811	ALERGENO MACARELA
LB-812	ALERGENO MAIZ CULTIVADO
LB-813	ALERGENO MALTA
LB-814	ALERGENO MAMEY
LB-815	ALERGENO MANGO
LB-816	ALERGENO MANZANA
LB-817	ALERGENO MANZANILLA (CHAMAEMELUM NOBILE)
LB-818	ALERGENO MELON
LB-819	ALERGENO MEZCLA COL, COLIFLOR Y BROCOLI
LB-820	ALERGENO MEZCLA DE CITRICOS (LIMON, LIMA, NARANJA)
LB-821	ALERGENO MEZCLA DE EMBUTIDOS
LB-822	ALERGENO MEZCLA DE HIERBAS

PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS

TIPO DE MUESTRA: SUERO

CONDICIONES DE LA MUESTRA: TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO.
TEMPERATURA DE REFRIGERACION

CÓDIGO

ESTUDIO

LB-823	ALERGENO MEZCLA DE MARISCOS
LB-824	ALERGENO MEZCLA DE ROBLES
LB-825	ALERGENO MEZQUITE
LB-826	ALERGENO MIEL DE ABEJA
LB-827	ALERGENO MORA AZUL
LB-828	ALERGENO MOSQUITO
LB-829	ALERGENO MOSTAZA
LB-830	ALERGENO MUCOR RACEMUS

N

LB-831	ALERGENO NARANJA
LB-832	ALERGENO NOGAL
LB-833	ALERGENO NUEZ
LB-834	ALERGENO NUEZ DE BRASIL
LB-835	ALERGENO NUEZ DE CASTILLA
LB-836	ALERGENO NUEZ PECANA

O

LB-837	ALERGENO OLIVO
LB-838	ALERGENO ONOPORDUM ACANTHIUM (CARDO RUSO)
LB-839	ALERGENO OREGANO
LB-840	ALERGENO ORINA DE RATA
LB-743	ALERGENO ORINA DE RATON
LB-841	ALERGENO OSTION
LB-842	ALERGENO OVOALBUMINA

P

CÓDIGO

ESTUDIO

LB-843	ALERGENO PALMA DATILERA
LB-844	ALERGENO PALMA REINA
LB-845	ALERGENO PAPA
LB-846	ALERGENO PAPAYA
LB-847	ALERGENO PASTO AVENA
LB-848	ALERGENO PASTO AZUL
LB-849	ALERGENO PASTO BAHIA
LB-850	ALERGENO PASTO BALLICO
LB-851	ALERGENO PASTO BERMUDA
LB-852	ALERGENO PASTO BROMO
LB-853	ALERGENO PASTO CANARIO
LB-854	ALERGENO PASTO CENTENO
LB-855	ALERGENO PASTO COMUN
LB-856	ALERGENO PASTO DE CARRIZAL
LB-857	ALERGENO PASTO DE CENTENO SILVESTRE
LB-858	ALERGENO PASTO DE HUERTO
LB-859	ALERGENO PASTO DE PRADERA
LB-860	ALERGENO PASTO INVERNAL
LB-861	ALERGENO PASTO JOHNSON
LB-862	ALERGENO PASTO PERENNE
LB-863	ALERGENO PASTO SILVESTRE
LB-864	ALERGENO PASTO TERCIOPELO
LB-865	ALERGENO PASTO TIMOTHY
LB-866	ALERGENO PASTO TRIGO

PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS

TIPO DE MUESTRA: SUERO

CONDICIONES DE LA MUESTRA: TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO.
TEMPERATURA DE REFRIGERACION

CÓDIGO	ESTUDIO	CÓDIGO	ESTUDIO
LB-867	ALERGENO PATA DE GALLO	LB-893	ALERGENO PLUMAS DE PAVO
LB-868	ALERGENO PENICILINA G	LB-894	ALERGENO PLUMAS DE PERIQUITO
LB-869	ALERGENO PENICILINA V	LB-895	ALERGENO PLUMAS DE POLLO
LB-870	ALERGENO PENICILLIUM BREVICOMPACTUM	LB-896	ALERGENO POLEN AVENA
LB-871	ALERGENO PENICILLIUM NOTATUM	LB-897	ALERGENO POLEN RAPE
LB-872	ALERGENO PEPINO	LB-898	ALERGENO POLILLA
LB-873	ALERGENO PERA	LB-899	ALERGENO POLIPROPILENO
LB-874	ALERGENO PEREJIL	LB-900	ALERGENO POLVO CASERO ALERGOPHARMA
LB-875	ALERGENO PERRO	LB-901	ALERGENO POLVO CASERO BENCARD
LB-876	ALERGENO PESCADO	LB-902	ALERGENO POLVO CASERO GREER
LB-877	ALERGENO PHOMA BETAE	LB-903	ALERGENO POLVO CASERO HOLLISTER-STIER
LB-878	ALERGENO PIMIENTA NEGRA	LB-904	ALERGENO POLVO CASERO JAPONES
LB-879	ALERGENO PIMIENTO ROJO	LB-905	ALERGENO PULPO
LB-880	ALERGENO PIMIENTO VERDE		
LB-881	ALERGENO PINO AUSTRALIANO		
LB-882	ALERGENO PINO BLANCO		
LB-883	ALERGENO PIÑA		
LB-884	ALERGENO PIRUL		
LB-885	ALERGENO PISTACHE		
LB-886	ALERGENO PITYROSPORIUM ORBICULARE		
LB-887	ALERGENO PLANTAGO SPP.		
LB-888	ALERGENO PLATANO		
LB-889	ALERGENO PLUMAS DE CANARIO		
LB-890	ALERGENO PLUMAS DE GANSO		
LB-891	ALERGENO PLUMAS DE LORO		
LB-892	ALERGENO PLUMAS DE PATO		
		Q	
		LB-906	ALERGENO QUESO CHEDDAR
		LB-907	ALERGENO QUESO TIPO MOHOSO
		LB-908	ALERGENO RATA
		LB-909	ALERGENO RATON
		LB-910	ALERGENO RHIZOPUS NIGRICANS
		S	
		LB-911	ALERGENO SALMON

PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS

TIPO DE MUESTRA: SUERO

CONDICIONES DE LA MUESTRA: TUBO TAPON DORADO. ENVIAR 2 ML DE SUERO.
TEMPERATURA DE REFRIGERACION

CÓDIGO

ESTUDIO

LB-912	ALERGENO SANDIA
LB-913	ALERGENO SARDINA
LB-914	ALERGENO SAUCE
LB-915	ALERGENO SEDA
LB-916	ALERGENO SORGHUM SPP.
LB-917	ALERGENO SORGO
LB-918	ALERGENO SOJA

T

LB-919	ALERGENO TOMATE
LB-920	ALERGENO TORONJA
LB-921	ALERGENO TRICHIDERMA VIRIDAE
LB-922	ALERGENO TRICHOPHYTON
LB-923	ALERGENO TRICHOSPORON PULLULANS
LB-924	ALERGENO TRIGO
LB-925	ALERGENO TRIGO SARRACENO
LB-926	ALERGENO TRUCHA
LB-927	ALERGENO TRUENO (LIGUSTRUM SP.)

U

LB-928	ALERGENO ULOCLADIUM CHARTARUM
LB-929	ALERGENO UVA

V

LB-930	ALERGENO VAINILLA
LB-931	ALERGENO VARA DORADA

CÓDIGO

ESTUDIO


LB-932	ALERGENO VENENO AVISPA AMARILLA
LB-933	ALERGENO VENENO AVISPA CAFE
LB-934	ALERGENO VENENO AVISPA PAPELERA
LB-935	ALERGENO VENENO DE ABEJA


Y

LB-936	ALERGENO YEMA DE HUEVO
LB-937	ALERGENO YOGUR

Z

LB-938	ALERGENO ZANAHORIA
--------	--------------------

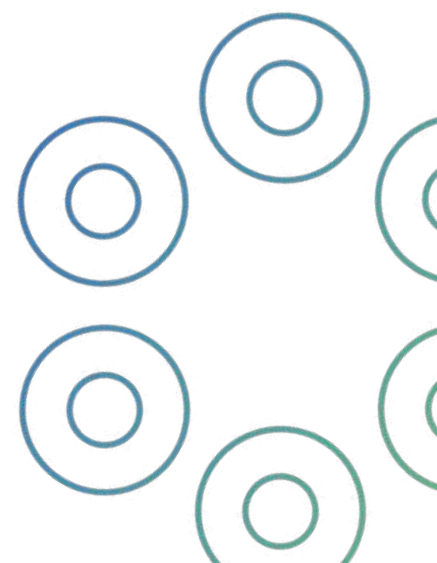

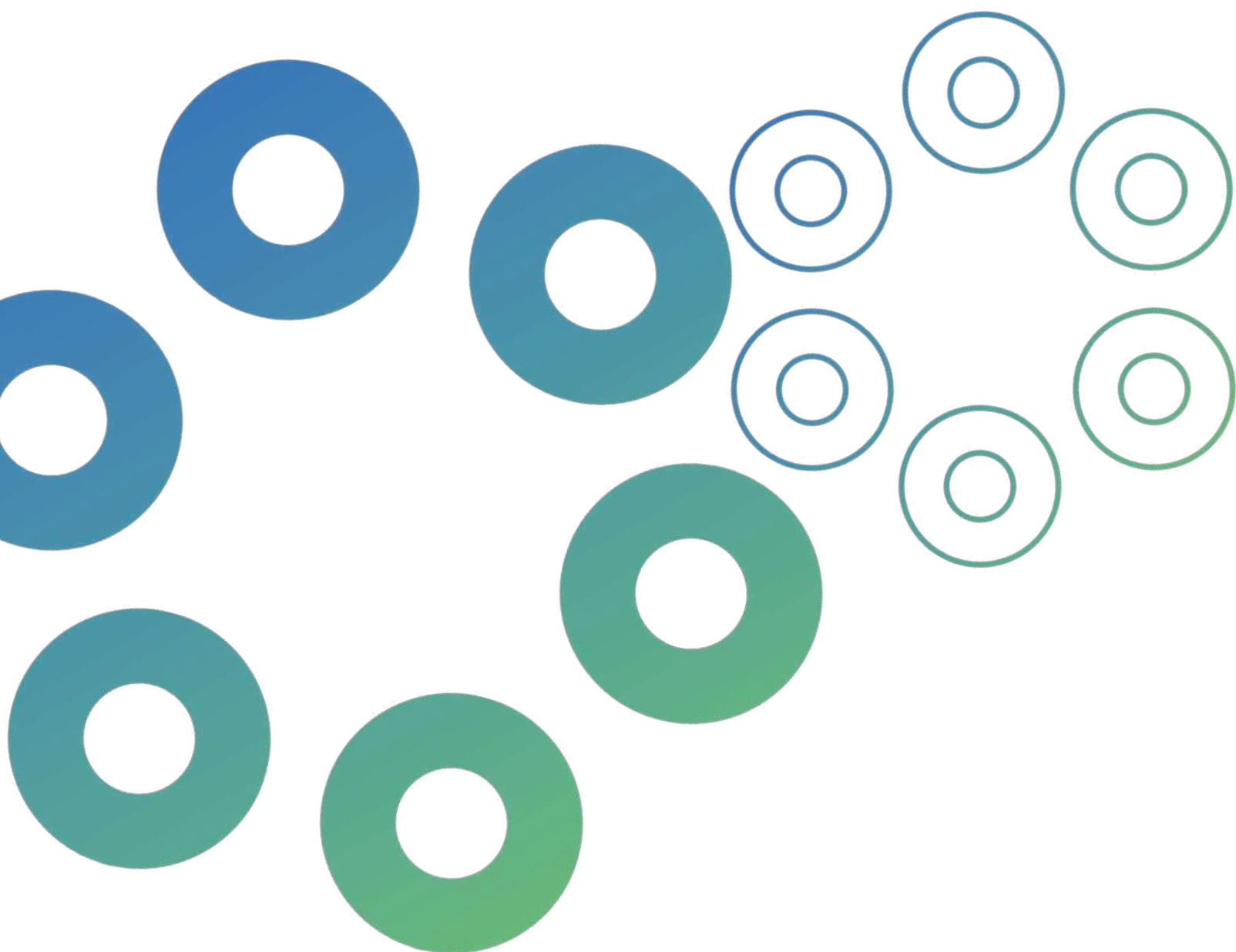

Lista de **CUESTIONARIOS**


Consulte con su asesor el cuestionario de los siguientes estudios antes de enviar las muestras al laboratorio

LB-001	LB-197	LB-561	LB-664	LB-680	LB-727
LB-182	LB-198	LB-646	LB-665	LB-681	LB-736
LB-183	LB-199	LB-647	LB-666	LB-682	LB-740
LB-184	LB-200	LB-648	LB-667	LB-683	LB-743
LB-185	LB-201	LB-650	LB-668	LB-684	LB-747
LB-186	LB-203	LB-653	LB-669	LB-686	LB-758
LB-187	LB-204	LB-654	LB-670	LB-687	LB-761
LB-188	LB-236	LB-655	LB-671	LB-688	LB-762
LB-189	LB-240	LB-656	LB-672	LB-689	LB-764
LB-190	LB-291	LB-657	LB-673	LB-690	LB-765
LB-191	LB-301	LB-658	LB-674	LB-691	LB-766
LB-192	LB-409	LB-659	LB-675	LB-692	LB-769
LB-193	LB-449	LB-660	LB-676	LB-693	LB-770
LB-194	LB-558	LB-661	LB-677	LB-694	LB-771
LB-195	LB-559	LB-662	LB-678	LB-695	LB-772
LB-196	LB-560	LB-663	LB-679	LB-708	LB-773

LB-775	LB-799	LB-827	LB-845	LB-874	LB-900
LB-776	LB-800	LB-828	LB-846	LB-875	LB-901
LB-778	LB-806	LB-829	LB-847	LB-879	LB-902
LB-781	LB-807	LB-830	LB-849	LB-880	LB-903
LB-782	LB-808	LB-831	LB-852	LB-881	LB-904
LB-783	LB-809	LB-832	LB-854	LB-882	LB-905
LB-784	LB-810	LB-833	LB-856	LB-883	LB-906
LB-785	LB-811	LB-834	LB-859	LB-886	LB-909
LB-786	LB-812	LB-835	LB-860	LB-888	LB-910
LB-788	LB-813	LB-836	LB-862	LB-889	LB-913
LB-789	LB-819	LB-837	LB-866	LB-890	LB-915
LB-790	LB-820	LB-838	LB-867	LB-892	LB-916
LB-792	LB-821	LB-839	LB-868	LB-894	LB-917
LB-793	LB-822	LB-840	LB-869	LB-895	LB-918
LB-794	LB-823	LB-841	LB-870	LB-896	LB-919
LB-795	LB-824	LB-842	LB-871	LB-897	LB-920
LB-796	LB-825	LB-843	LB-872	LB-898	LB-921



LB-797	LB-826	LB-844	LB-873	LB-899	LB-922
LB-924	LB-925	LB-926	LB-927	LB-928	LB-933
LB-936	LB-937	LB-938	LB-959	LB-1026	LB-1037
LB-1040	LB-1041	LB-1050			

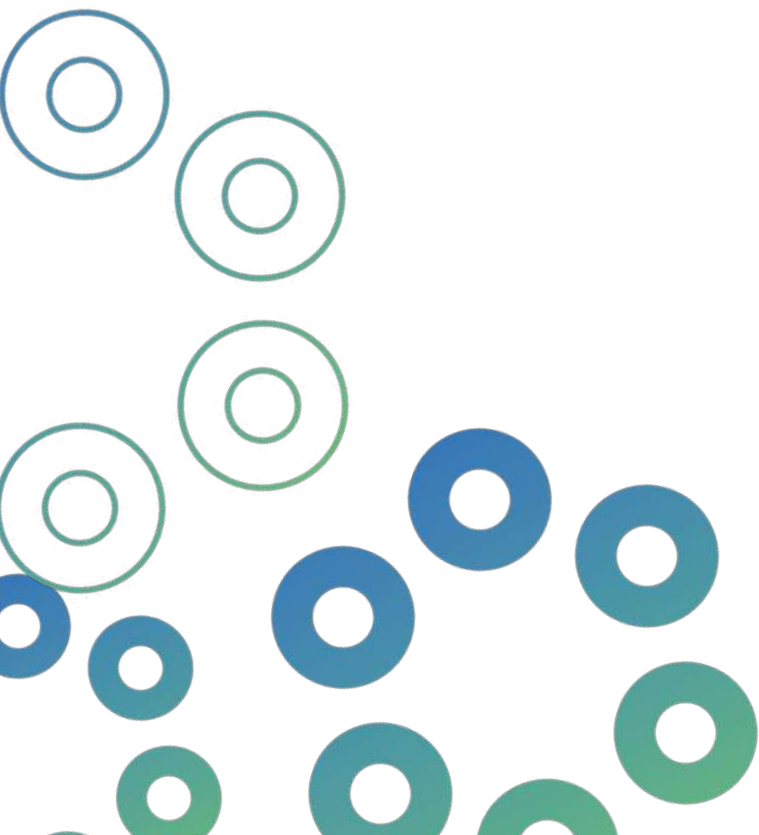



ENVÍO DE **MUESTRAS**

GUÍA DE EMBALAJE DE MUESTRAS



1. Abra el contenedor secundario. Asegúrese de que tenga un tamaño adecuado para contener el o (los) envases primarios que contiene la muestra.

2. Coloque material absorbente en el interior de un contenedor secundario asegurándose de que el material sea suficiente para absorber todo material biológico del contenedor primario en caso de rotura o derrame.



3. Envuelva el contenedor primario con material amortiguador (recuerde que todo contenedor primario no debe exceder la tercera parte de su capacidad). Si se envía más de una muestra, cada una debe ir envuelta individualmente con material amortiguador, no coloque cinta adhesiva.

4. Coloque el o (los) contenedor(es) primarios dentro del contenedor secundario.





5. Cierre el contenedor secundario.


Para envíos temperatura ambiente

6. Coloque la documentación en un sobre de plástico, entre el embalaje secundario y el embalaje externo. Cuando se requieran la declaración del expedidor para mercancías peligrosas y la guía aérea se entregarán al transportista por lo que no deberán incluirse en el interior del embalaje.



7. Coloque el sobre con los documentos dentro del contenedor terciario y cierre bien.

8. Coloque cinta adhesiva para sellar la caja de forma segura, escriba con marcador indeleble, hora, fecha y su firma sobre la cinta, de tal forma que la escritura atraviese la cinta a lo ancho de la de la misma.

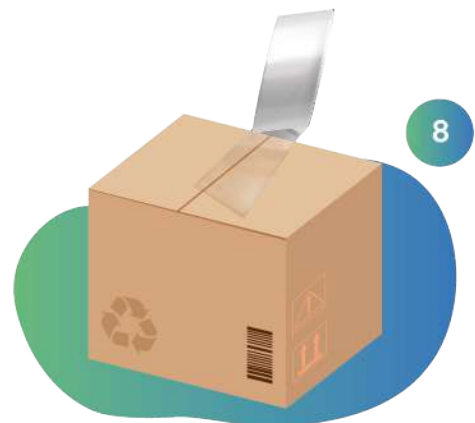

Para envíos en refrigeración



9. Coloque el contenedor secundario dentro de la caja de unicel con varios geles refrigerantes congelados, éstos deberán ser suficientes para mantener la(s) muestra(s) entre 4 y 8°C durante el trayecto al laboratorio.

10. Coloque la caja de unicel en el interior del contenedor terciario (caja externa de cartón).



11. Coloque la documentación en un sobre de plástico entre el embalaje secundario y embalaje externo. Cuando se requieran, la declaración del expedidor para mercancías peligrosas y la guía aérea se entregarán al transportista, por lo que no deberán incluirse en el interior del embalaje.

12. Coloque cinta adhesiva para sellar la caja de forma segura, escriba con marcador indeleble, hora, fecha y su firma sobre la cinta, de tal forma que la escritura atraviese la cinta a lo ancho de la misma.





AVISO DE
PRIVACIDAD

AVISO DE PRIVACIDAD

Para consultar el aviso de privacidad haz clic en el siguiente enlace:

https://na4.documents.adobe.com/public/esignWidget?wid=CBFCIBAA3AAABLbqZhAGHrd-TUDX8PT4djrfQh7rCiM3rvjfVo-_WNQ7FJCcyzkzmqHCD-jvLi1JGNp5aRL8*



Canal de Miramontes #2110
Col. Educación, Coyoacán,
C.P. 04400, CDMX

Av. Jesús del Monte #32,
Hacienda de las Palmas,
Huixquilucan, C.P. 52764, EDO. MEX.

Av. de la Convención de 1914,
Sur, #103
Col. Fraccionamiento
Las Américas, C.P. 20278,
Aguascalientes, México.

<http://www.labnóstico.mx/>

VT-CAL-CAT-001